


i-gel

supraglottische Atemhilfe mit weicher Gel-Manschette

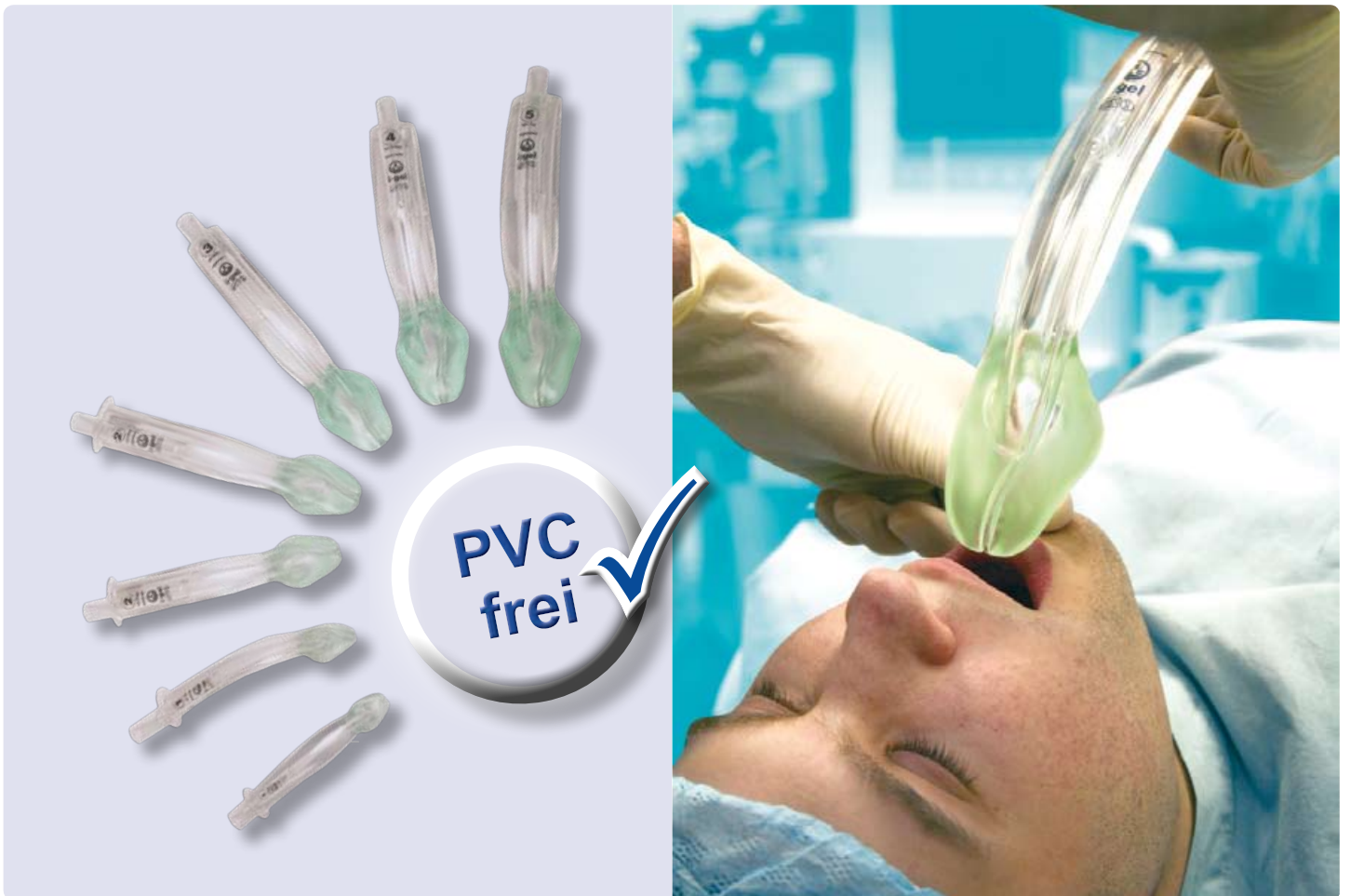

- Einfache Handhabung
- Schnelle Einführung in Sekunden
- Naturgetreue & anatomische Passform

i-gel

supraglottische Atemhilfe



i-gel = natürliches Atemwegs-Management

i-gel ist eine einzigartige supraglottische Atemhilfe und das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Das erreichte Ziel dieser Entwicklung ist eine perfekte Übereinstimmung mit der Anatomie, das Design wurde inspiriert durch die Architektur der perilaryngealen Strukturen. Form, Konsistenz und Konturen des Produktes bilden exakt die pharyngealen, laryngealen und perilaryngealen Verhältnisse ab, um eine perfekte Abdichtung zu erzielen. Dieses innovative Konzept erübrigt das Aufblasen einer Manschette und reduziert damit signifikant das Risiko von Kompressionsstraumata.

Keine aufblasbare Manschette


Die Bezeichnung i-gel ist abgeleitet von dem gelartig weichen Material. Erst dieses innovative thermoplastische Elastomer von medizinischer Qualität ermöglichte die Entwicklung einer nicht aufblasbaren Manschette und damit die einzigartig schnelle, leichte und zuverlässige Einführung.

leicht, sicher und schnell

Die Anwendung von i-gel ist unglaublich einfach. Ein geübter Anwender kann das Produkt in weniger als 5 Sekunden einführen. i-gel ermöglicht ohne Blockmanschette eine sichere und schnelle Airway-Management-Lösung.

Anwendungen

i-gel wurde entwickelt zur Aufrechterhaltung offener Atemwege für routine- und notfallmäßige Narkosen während operativer Eingriffe an nüchternen Patienten unter Spontanatmung oder intermittierender Überdruckbeatmung (IPPV).

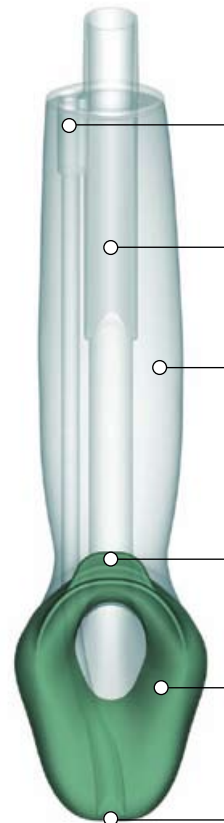

Gastrischer Absaugkanal

Distale Spitze mündet anatomisch exakt im Ösophagusmund und ermöglicht neben der Absaugung die Einführung einer Magen-Sonde und erleichtert die Entlüftung.

Integrierter Beißkeil

Vermindert die Gefahr einer möglichen Atemwegsokklusion.

Vestibulum oris Stabilisator

Erleichtert die Einführung und vermindert die Gefahr einer möglichen Rotation in der Mundhöhle.

Epiglottisblocker


Trägt dazu bei, ein Herunterklappen der Epiglottis oder eine Obstruktion der distalen Atemwegsöffnung zu vermeiden.

Nicht aufblasbare Manschette

Die weiche, nicht aufblasbare Manschette ermöglicht eine reibungslose Einführung unter Vermeidung von Kompressionsstraumata.

Distales Ende des gastrischen Absaugkanals

Natürliches Airway-Management

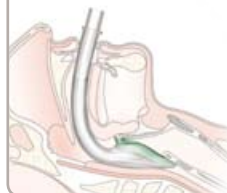

i-gel ist anatomisch & naturgetreu, legt sich exakt über das Knorpelgerüst des Larynx, erreicht eine zuverlässige perilaryngeale Abdichtung und macht somit eine aufblasbare Manschette überflüssig.

Bestellhinweis i-gel für Pädiatrie

Art.Nr.	Größe	Typ	kg	VE	Farbe
37 8201	1,0	Neugeborenen	2 - 5 kg	10 Stück	
37 8215	1,5	Kleinkind	5 - 12 kg	10 Stück	
37 8202	2,0	Kind / small	10 - 25 kg	10 Stück	
37 8225	2,5	Kind / large	25 - 35 kg	10 Stück	

Bestellhinweis i-gel für Erwachsene

Art.Nr.	Größe	Typ	kg	VE	Farbe
37 8203	3,0	Erwachsen / small	30 - 60 kg	25 Stück	
37 8204	4,0	Erwachsen / medium	50 - 90 kg	25 Stück	
37 8205	5,0	Erwachsen / large	+90 kg	25 Stück	