



# Freies Sichtfeld und optimaler Tragekomfort



## Wisp Nasenmaske

beste Abdichtung mit minimalem Kontakt

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Bester Tragekomfort und volle Bewegungsfreiheit

Die Wisp kombiniert den Komfort einer Nasenmaske mit dem einfachen Design einer Minimal-Kontakt-Maske. Damit können Sie bequem lesen, fernsehen und sogar Ihre Brille tragen, bevor Sie schlafen.



## Für einen erholsamen Schlaf

Die Wisp bietet Ihnen hohen Komfort, einfache Handhabung und optische Ästhetik.

Das einzigartige Nasenspitzen-Kissen sitzt stabil unter der Nasenbrücke und ermöglicht so eine hervorragende Abdichtung mit einer minimalen Kontaktfläche.


Bei der Auto-Seal-Technologie befindet sich über dem Maskenkissen eine zusätzliche Silikonmembran, die sich während des Betriebes mit Luft füllt. Dadurch passt sich die Maske automatisch an alle Gesichtskonturen an und sorgt so für eine optimale Abdichtung.

Kopfbewegungen während der Nacht werden durch das Ziehharmoniken-Kissen ausgeglichen wodurch ein stabiler Halt gewährleistet ist.

## Die Vorteile der Wisp im Überblick

- Ein freies Sichtfeld für größere Unabhängigkeit. Sie können lesen, fernsehen und sogar Ihre Brille tragen, bevor Sie einschlafen.
- Die Wisp bietet hohen Komfort und eine einfache Handhabung für Ihren erholsamen Schlaf.
- Die Wisp ist mit einem transparenten Silikonrahmen oder einem Stoffrahmen erhältlich.
- Durch nur wenige Einzelteile und die leicht einrastenden Kopfband-Clips ist die Wisp einfach zu verwenden und zu pflegen.



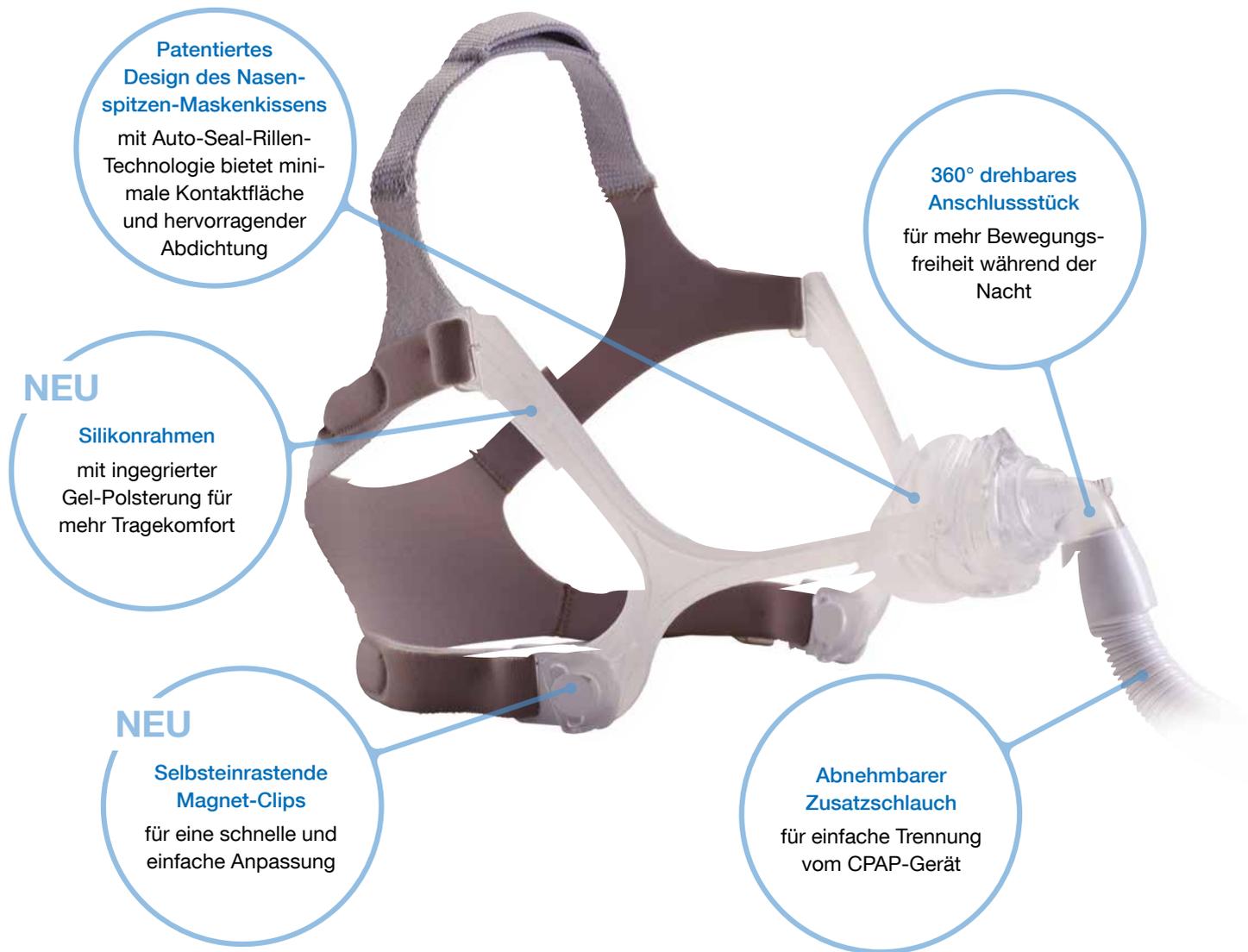

## Verschiedene Maskenrahmen und Maskenkissengrößen

Dem Wisp Masken-Set sind drei Maskenkissen in verschiedenen Größen beige-packt. Die Maskenhalterung ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, entweder einem Silikonrahmen oder einem Stoffrahmen.



### Durchsichtiger Silikonrahmen

Der weiche Silikonrahmen ist durch seine glatte Oberfläche besonders leicht zu reinigen und pflegen. Die zusätzliche komfortable Geleinlage sorgt für mehr Tragekomfort.



### Doppelseitiger Stoffrahmen

Der Stoffrahmen fühlt sich sehr weich an und ist beidseitig tragbar. Auf der einen Seite bietet er ein Gefühl von seidigem Satin und auf der anderen von weichem Leder auf der Haut.




### Drei Maskenkissengrößen

Jedes Maskenset enthält alle drei Maskenkissengrößen, die für denselben Rahmen geeignet sind. Tragen Sie die Größe, die Ihnen am besten passt.

## Anwendung und Pflege leicht gemacht

Mit nur vier Einzelteilen steht Ihnen die Wisp schnell und einfach zur Verwendung bereit und ist besonders leicht zu reinigen.

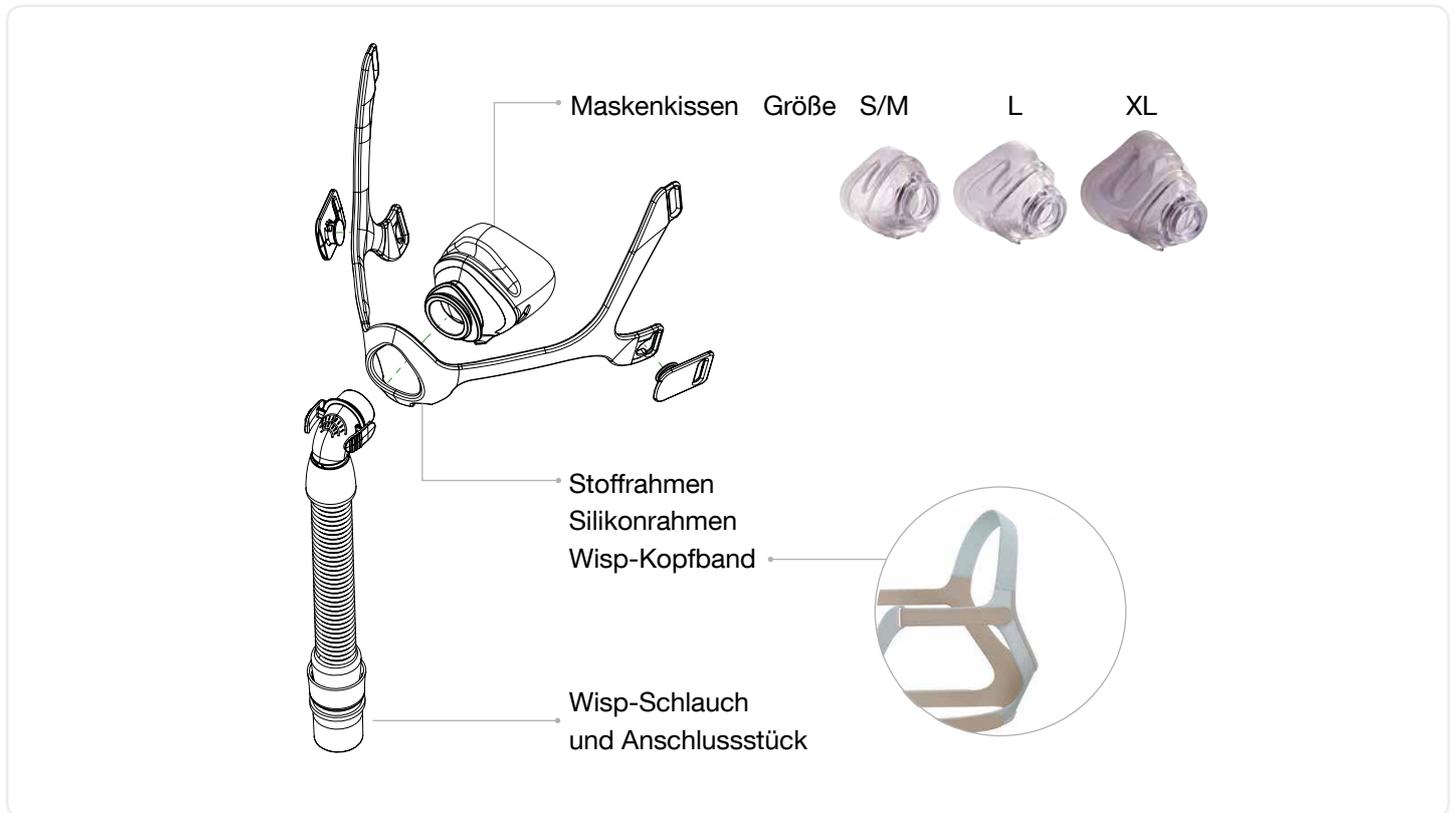

## Bestellhinweis

<b>Wisp Nasenmaske mit Ausatemventil</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>VE/Stk.</b>
Wisp Masken-Set mit Silikonrahmen und Kopfband (3 Größen)	781094060	1
Wisp Masken-Set mit Stoffrahmen und Kopfband (3 Größen)	781094061	1
<b>Wisp Nasenmaske ohne Ausatemventil</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>VE/Stk.</b>
Wisp Masken-Set SE mit Silikonrahmen und Kopfband (3 Größen)	781094062	1

## HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen.

Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

