



Atemwegs-Sicherung wenn jede Sekunde zählt



i-gel Resus O₂ **supraglottische Notfall-Atemhilfe**

Beatmung oder passive Oxygenierung
keine gefährliche No-Flow Time (NFT)



Die aktuelle Bibliografie für Reanimation und Notfalleinsatz
finden Sie unter www.habel-medizintechnik.at

HABEL
MEDIZINTECHNIK

i-gel Resus O₂

supraglottische Notfall-Atemhilfe

i-gel ist eine einzigartige supraglottische Atemhilfe und das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, wobei eine perfekte Übereinstimmung mit der Anatomie, inspiriert durch die Architektur der perilaryngealen Strukturen, gelungen ist.



i-gel = natürliches Atemwegs-Management

Form, Konsistenz und Konturen des Produktes bilden exakt die pharyngealen, laryngealen und perilaryngealen Verhältnisse ab, um eine perfekte Abdichtung zu erzielen. Dieses innovative Konzept erübrigt das Aufblasen einer Manschette und reduziert damit das Risiko von Kompressionstraumata signifikant.

Das neue i-gel Resus O₂-Paket wurde speziell für die hohen Anforderungen der Beatmung in der Notfall-Situation entwickelt – denn in diesem sensiblen Bereich ist die Zeit knapp und eine schnelle und sichere Anwendung von essentieller Bedeutung.



Das Konzept der i-gel Resus O₂ (Gel-Manschette, Absaugkanal, 12G-Absaugsonde, O₂-Kanal, Gleitgel, Fixationsband, farbcodierter Hakenring – für die schnelle Identifikation der passenden Größe) reduziert durch die Möglichkeit der passiven Oxygenierung Unterbrechungen der kritischen Herzkompressions-Phase auf ein Minimum, und trägt so zu einer erfolgreichen Reanimation bei.

Die Vorteile

- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der i-gel Resus O₂ in < 5 sec.
- Ermöglicht passive O₂-Applikation als Ventilations-Alternative (während der CCR)
- Weitgehend reduzierte Kompressionsunterbrechungen, vermeidet No-Flow Time (NFT)
- Enthält alle für den schnellen Einsatz notwendigen Komponenten

Bestellhinweis i-gel Resus O₂ für Erwachsene

Typ	Art.-Nr.	Größe	kg	VE/Stk.
S	378703	3,0	30–60 kg	6
M	378704	4,0	60–90 kg	6
L	378705	5,0	> 90 kg	6

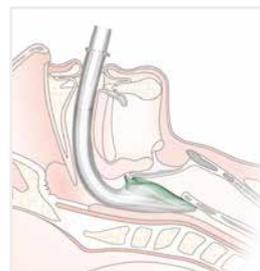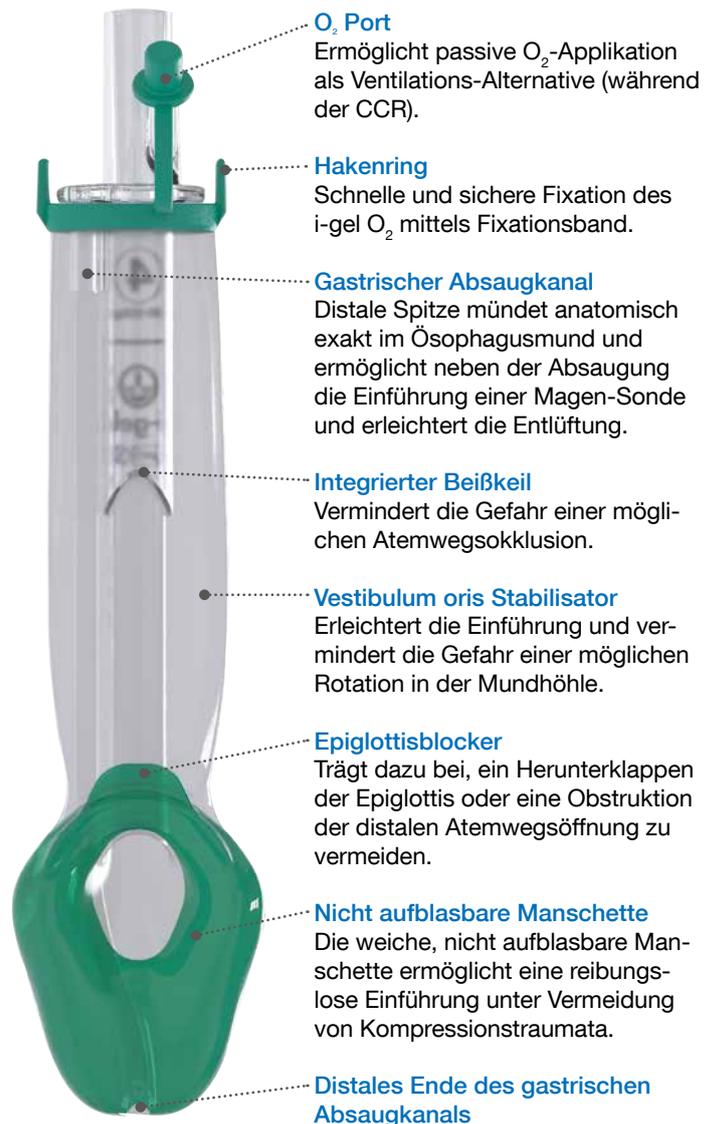

Natürliches Airway-Management

i-gel ist anatomisch & naturgetreu geformt, legt sich exakt über das Knorpelgerüst des Larynx, erreicht eine zuverlässige perilaryngeale Abdichtung und macht somit eine aufblasbare Manschette überflüssig.