



Leckagefreie Aerosoltherapie



Cirrus 2 **Medikamentenvernebler**

effiziente, tracheobronchiale Deposition
kein Medikamentenverlust

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Cirrus 2 Medikamentenvernebler




Eigenschaften

Die umweltfreundliche und effiziente Medikamentenverneblung mit folgenden Vorteilen:

- geringes Residual-Volumen, um Medikamentenverlust zu minimieren
- Anzeige der noch verfügbaren Medikamenten-Menge
- Quick Release Fitting – konnektieren und diskonnektieren des Verneblers mit einer Vierteldrehung
- weniger Zeit zum Nachfüllen notwendig
- Teilchengröße von 2,7 micron bei einem Flow von 8l / Minute ermöglicht effiziente, tracheobronchiale Deposition der Medikamente

Leistungsmessung

Die optimale Teilchengröße für die tracheobronchiale Deposition liegt bei 2 bis 5 μ .

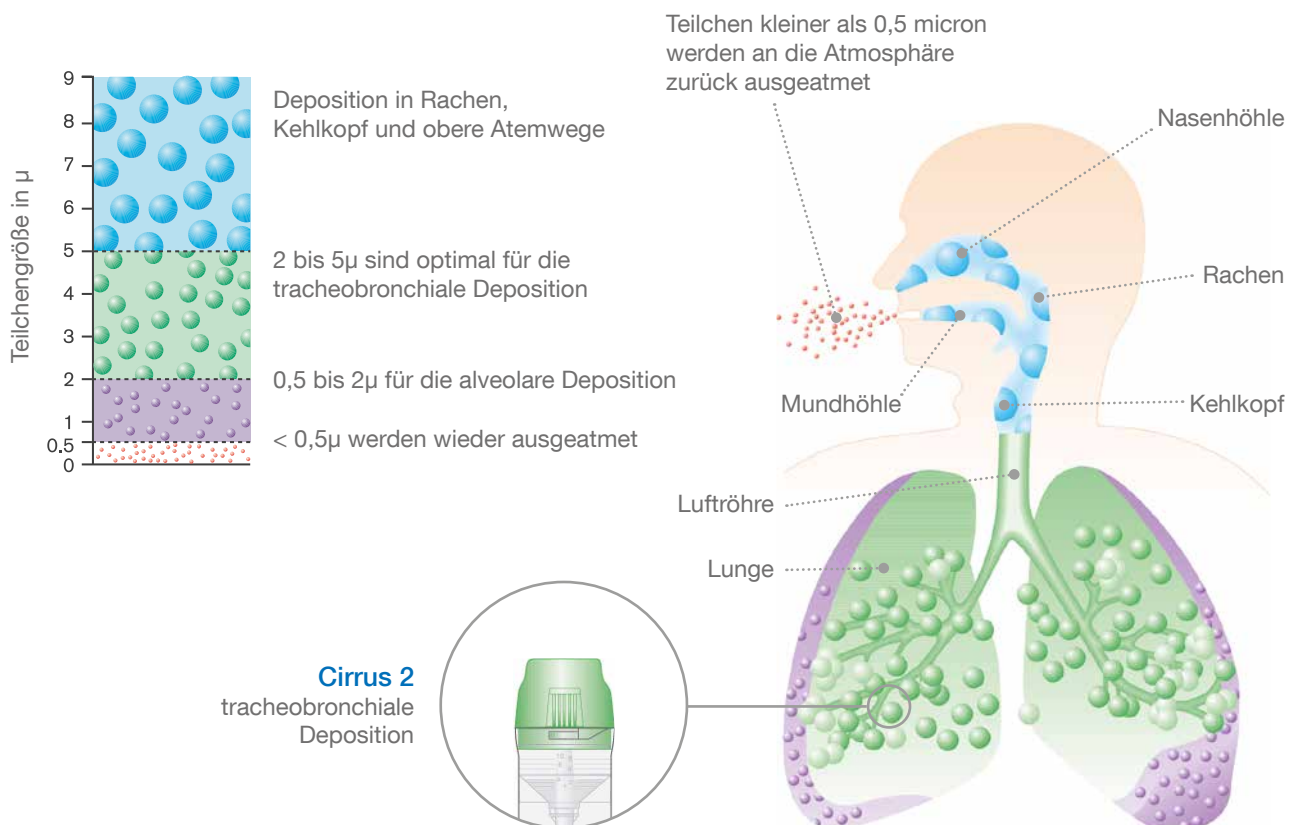



Cirrus 2 Vernebler mit EcoLite Aerosolmaske

- effiziente Medikamenten-Verneblung mit einzigartigem Tragekomfort durch 2-Komponenten Material
- keine Druckstellen und keine Leckagen
- keine Verneblung in die Augen des Patienten
- Senkung der Umweltbelastung, da PVC-frei



FiltaNeb Cirrus 2 Vernebler mit Filter an der Ausatemungsöffnung

- 95 % Reduktion der Partikelabgabe während der Verneblertherapie
- Zusätzliches Kopfband sorgt für eine bessere Abdichtung und optimale Passform
- Auswahl zwischen Maskenposition „unter dem Kinn“ und „auf dem Kinn“ für eine leichtere Anpassung



Cirrus 2 Vernebler mit Mundstück und Schlauch

- effiziente Medikamentenverneblung für die orale Inhalation

Cirrus 2 Vernebler mit selbstschließendem T-Stück


Medikamenten-Verneblung beim beatmeten Patienten

- das Federventil des T-Stücks schließt oder öffnet automatisch
- keine Störungen und keine Geräte-Alarme beim Entfernen des Verneblers
- das selbstschließende T-Stück ist sowohl einzeln, als auch im Set mit dem Medikamenten-Vernebler und einem Druckschlauch erhältlich



Vernebler wird eingesetzt:


Ventil öffnet sich. Das zerstäubte Medikament gelangt ins Beatmungssystem.

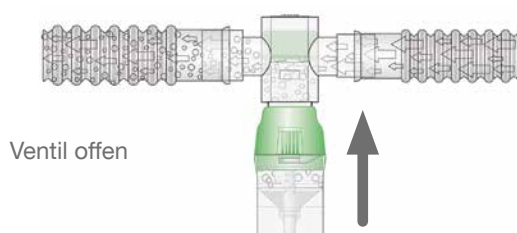

Ventil offen

Vernebler wird entnommen:




Ventil schließt sich beim Entfernen des Verneblers und dichtet das System ab.

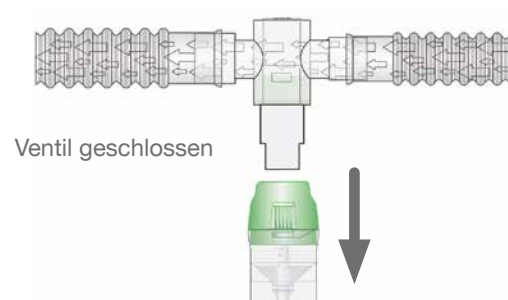

Ventil geschlossen

Leckagefreie, effiziente, tracheobronchiale Deposition

Bestellhinweis

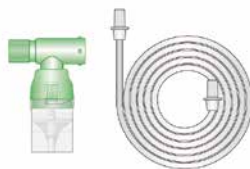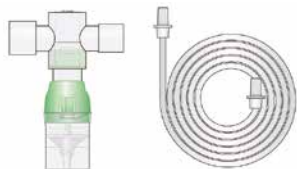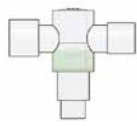PVC & DEHP frei		Beschreibung	Art.-Nr.	VE/Stk.
		Cirrus 2 Verneblerset für Erwachsene mit EcoLite Maske und 2,1 m Schlauch, PVC und DEHP frei	37 1453-015	30
		Cirrus 2 Vernebler-Set zum Einbau in 22mm Beatmungssysteme, mit 1,8 m Schlauch, DEHP frei	372605	40
		Cirrus 2 Verneblerset zum Einbau in 15mm Beatmungssysteme, mit 1,8 m Schlauch	372606	35
		Cirrus 2 Verneblerset zum Einbau in 10mm Beatmungssysteme, mit 1,8 m Schlauch	372608	45
		Cirrus 2 Vernebler-Set mit selbstschließendem T-Stück für 22mm Systeme, 1,8 m Schlauch, DEHP frei	372609	35
		Cirrus 2 Vernebler-Set mit Mundstück, T-Stück und 1,8 m Schlauch, DEHP frei	371464	40
		Cirrus 2 Vernebler-Set für Kinder mit EcoLite Maske und 2,1 m Schlauch, DEHP frei	371454-015	20
		FiltaNeb Cirrus 2 Vernebler für Erwachsene mit EcoLite Maske, Filter und 2,1 m Schlauch, DEHP frei	371453-044	15
		Beschreibung	Art.-Nr.	VE/Stk.
		Cirrus 2 Vernebler	371402	75
		Selbstschließendes T-Stück zum Einbau in 22 mm Beatmungssysteme	371814	10