



Maximale Abdichtung bei hohem Tragekomfort



**VariFit mit
AIR-gel Technologie**

keine Druckstellen – minimales Gewicht

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Leckagefreie NIV-Beatmung

Die innovative VariFit NIV-Maske ist für den Einsatz bei *einem* Patienten konzipiert und verfügt über ein Kissen mit AIR-gel Technologie für erhöhten Patientenkomfort. Das atmungsaktive Kopfband mit Schnellverschluss lässt sich schnell anpassen und ist besonders komfortabel.

AIR-gel

Maximaler Komfort, minimales Gewicht:
AIR-gel reduziert Druckpunkte und Hautreizungen

Innovatives Kissen mit Gel-Polster

Ergonomische Form bietet effektive Abdichtung und komfortablen Sitz

Aktive Kopfband-Befestigung

Bewegt sich mit dem Patienten – für eine verlässliche Abdichtung

Konnektor farbcodiert

Hilft Anwendern bei der Wahl der richtigen Maske

Flexible Spacebar

Stabilisator hält Kopfband in der gewünschten Position, ohne dabei die Haut des Patienten zu berühren

Ausatemöffnung


Für CPAP- oder Bilevel-Anwendungen
(nur 372260 bis 372262)

Sauerstoff-Port

Für Zufuhr von O₂

Sicherheitsventil

Verhindert Rückatmung im Fall einer unzulänglichen Beatmung

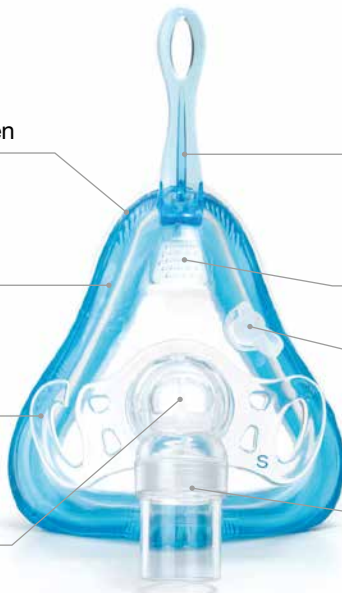

NIV-Maske:

- ohne Ausatemöffnung, ohne Sicherheitsventil
- für Intensiv-Respiratoren und HighFlow-CPAPs

Konnektor: blau ●



NIV-Maske:

- ohne Ausatemöffnung, mit Sicherheitsventil
- für NIV-Respiratoren wie z.B. V60 oder Vision für Einschlauchsysteme mit CO₂-Leckage-Port

Konnektor: klar/blau ◐



NIV-Maske:

- mit Ausatemöffnung, mit Sicherheitsventil
- für NIV- oder Bilevel-Geräte mit Einschlauchsystemen ohne CO₂-Leckage-Port

Konnektor: klar ○



Bestellhinweis

Produkt	Größe	Art.-Nr.	VE
Zur Verwendung für Intensiv-Respiratoren und HighFlow-CPAPs: HABEL Intersurgical VariFit NIV-Maske, ohne Ausatemöffnung Farbe Konnektor: ●	Erwachsene klein	372265	8
	Erwachsene medium	372266	8
	Erwachsene groß	372267	8
	Erwachsene extra-groß	372279	8
Zur Verwendung mit Einschlauch-Beatmungssystemen mit CO₂-Leckage-Port: HABEL Intersurgical VariFit NIV-Maske, ohne Ausatemöffnung, mit Sicherheitsventil Farbe Konnektor: ◐	Erwachsene klein	372263	8
	Erwachsene medium	372264	8
	Erwachsene groß	372269	8
	Erwachsene extra-groß	372278	8
Zur Verwendung mit Einschlauch-Beatmungssystemen ohne CO₂-Leckage-Port: HABEL Intersurgical VariFit NIV-Maske, mit Ausatemöffnung, mit Sicherheitsventil Farbe Konnektor: ○	Erwachsene klein	372260	8
	Erwachsene medium	372261	8
	Erwachsene groß	372262	8
	Erwachsene extra-groß	372277	8