



Schneller CPAP bei akuter Atemnot



GO-PAP Notfall CPAP-System

integrierte Verneblung
PEEP von 5 bis 10 cm H₂O

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Das optimale CPAP-System für den Notfall

Das GO-PAP ist ein Einweg Notfall-CPAP-System, das direkt an eine Sauerstoffquelle angeschlossen wird. Da der PEEP unabhängig vom Flow geregelt wird, muss dieser nicht angepasst werden, um das PEEP-Niveau zu halten. Damit ist es nicht mehr nötig von komplexen Tabellen abzulesen oder Manometer zu überwachen. Darüber hinaus bietet dieses vollständig entsorgbare System eine integrierte Verneblung, während ein gleichmäßiger Flow zum Patienten aufrechterhalten wird.

2018 EMS World Innovation Award Winner

Das GO-PAP wurde 2018 mit dem EMS World Innovation Award ausgezeichnet – ein Award bei dem die bahnbrechendsten Entwicklungen des Jahres im Bereich EMS, die auf der EMS World Expo vorgestellt werden, von einer unabhängigen Jury gekürt werden. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des redaktionellen Beirats der EMS World und der EMS World Expo-Fakultät zusammen und beurteilte das GO-PAP als „Ausgezeichnetes Gerät. Unkompliziert, tragbar, einfach. Es wäre eine großartige Ergänzung für viele Krankenwagen.“



Zwei Kopfband-Designs

Standard oder mit Haube

Verstellbarer PEEP

5, 7,5 oder 10 cm H₂O

40 Minuten Laufzeit

bei Verwendung einer medizinischen 2l Sauerstoffflasche

Liefert etwa 90 l/min
Patienten-Flow bei 30 % FiO₂
bei Betrieb mit 10 l/min Sauerstoff

Integrierte Verneblung


ohne Flowunterbrechung zum Patienten



37313-4600




37313-9185

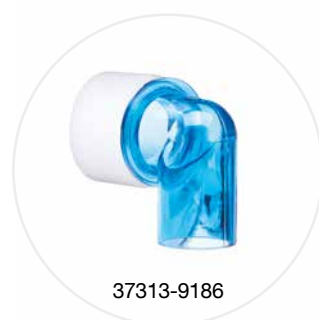

37313-9186

Zubehör

Zum Zubehör gehören der GO-PAP-Systemgenerator und der ADAPT-2-VENT, ein Adapter-Kniestück, das die Verwendung der BiTrac ED-Maske an Standard-Beatmungssystemen (Ein- & Zwei-Schlauchsystemen) ermöglicht. Dadurch kann der Patient von CPAP unter Verwendung des GO-PAP oder der O2-MAX auf andere Beatmungsformen umsteigen, ohne die Patientenschnittstelle zu ändern.

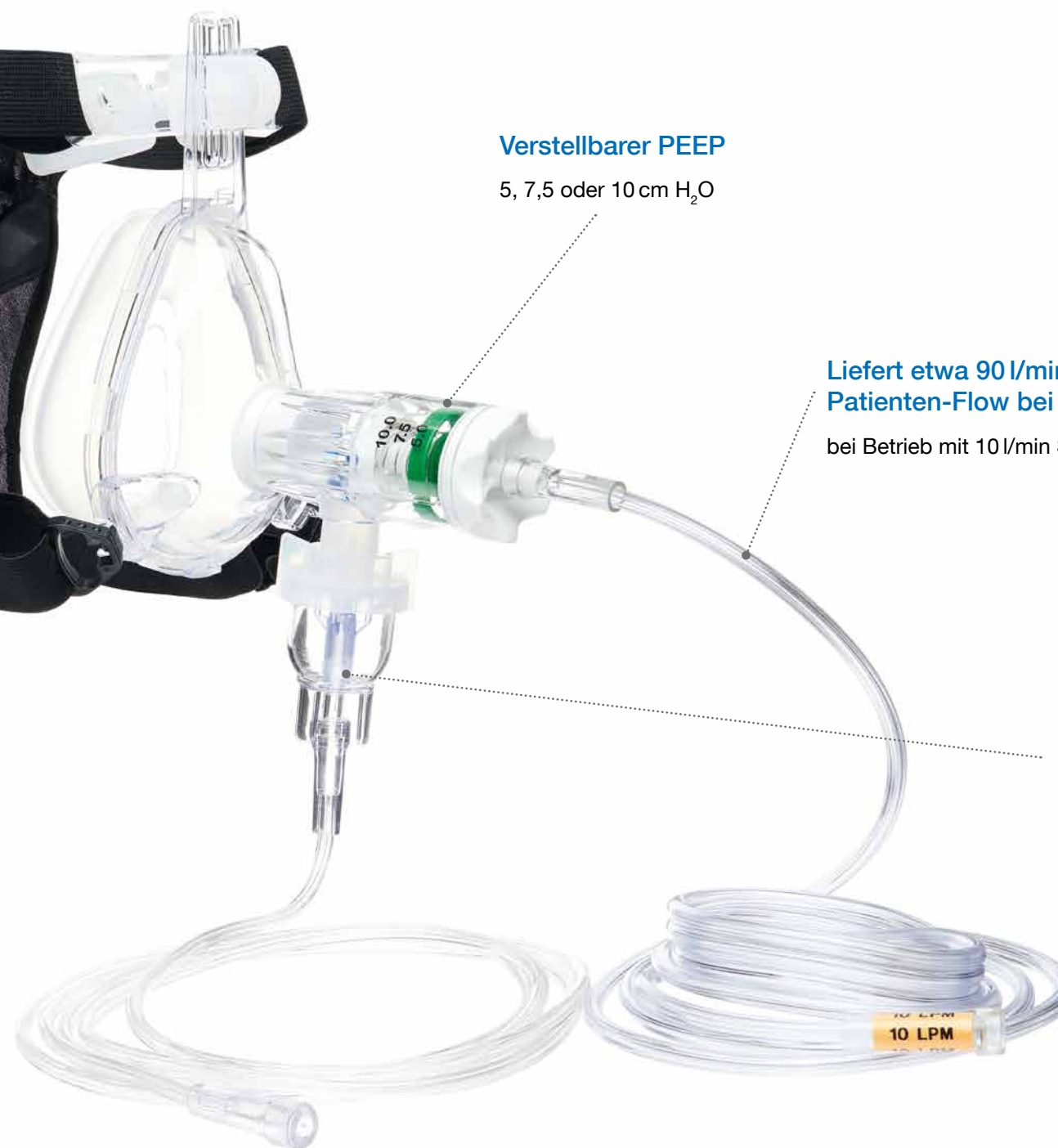

GO-PAP-System mit Kopfband und Haube

Artikel		Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED-Maske mit Kopfband und Haube		L	37313-4605N	10
		M	37313-4604N	10
GO-PAP-System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED-Maske mit Kopfband und Haube		L	37313-4605	10
		M	37313-4605	10

GO-PAP-System mit Standard-Kopfband

Artikel		Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED-Maske mit Standard-Kopfband		L	37313-4603N	10
		M	37313-4602N	10
		S	37313-4601N	10
GO-PAP-System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED-Maske mit Standard-Kopfband		L	37313-4603	10
		M	37313-4602	10
		S	37313-4601	10

BiTrac ED-Maske

Artikel		Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
BiTrac ED-Maske mit Kopfband und Haube		XL	37313-7031C	10
		L	37313-7030C	10
		M	37313-7029C	10
		S	37313-7028C	10
BiTrac ED-Maske mit Standard-Kopfband		XL	37313-7031	10
		L	37313-7030	10
		M	37313-7029	10
		S	37313-7028	10

Zubehör

Artikel		Art.-Nr.	VE/Stk.
GO-PAP-System-Generator mit Sauerstoffschlauch		37313-4600	10
ADAPT-2-VENT 30mm ID Kniestück mit Anti-Asphyxie-Ventil		37313-9185	10
ADAPT-2-VENT 30mm ID Standard-Kniestück		37313-9186	10