

Einfacher und sicherer Trachealtubuswechsel



X-Changer Tubuswechsler

farbige, weiche und atraumatische distale Spitze
in 3 Größen erhältlich

X-Changer Tubuswechsler

Der X-Changer ermöglicht einen einfachen Trachealtubuswechsel mit der Möglichkeit einer vorübergehenden Oxygenierung. Er ist besonders benutzerfreundlich, verfügt über eine farbige, weiche und atraumatische distale Spitze und erhöht die Sicherheit beim Wechsel des Trachealtubus.¹



Aufrechterhaltung des Atemwegs während dem Trachealtubuswechsel

Der X-Changer ist in 3 Größen (11 Fr, 14 Fr, 19 Fr) und einer Länge von 80 cm erhältlich, um den Abstand zwischen dem Innendurchmesser des Trachealtubus und dem Außendurchmesser des Katheters zu minimieren und so ein Anstoßen an den Aryknorpel zu verhindern.²

Der Katheter aus weichem Material sorgt für eine bessere Patientenverträglichkeit. Wenn dieser als Platzhalter für die Extubation verwendet wird, kann er in situ verbleiben, bis die Notwendigkeit für eine Re-Intubation als unwahrscheinlich betrachtet wird.^{3,4} Den Atemwegszugang aufrechtzuerhalten erhöht die Erfolgsaussicht, falls eine Re-Intubation bei Patienten mit schwierigem Atemweg notwendig wird.⁵




Weiche atraumatische Spitze

- Stumpfe Spitze ist flexibel und atraumatisch
- Farbkodiert, zur einfachen Größenerkennung



Oxygenierung

- Hohler Katheter mit lateralen Öffnungen, um Sauerstoff zu verabreichen
- Wird mit 2 Arten von O₂ Konnektoren geliefert

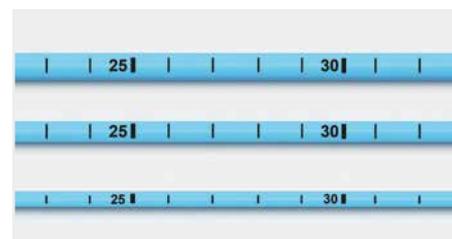

Zentimetermarkierungen

- Dienen zur sicheren Bestimmung der Einführtiefe
- Ermöglichen die korrekte Ausrichtung mit dem Trachealtubus

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
X-Changer Tubuswechsler 11Fr für ET-Tuben ≥ 4mm	4733-42-800-1	5
X-Changer Tubuswechsler 14Fr für ET-Tuben ≥ 5mm	4733-41-800-1	5
X-Changer Tubuswechsler 19Fr für ET-Tuben ≥ 7mm	4733-40-800-1	5

Quellen

1. M. Parotto et al., „Extubation of the Challenging or Difficult Airway,” Current anesthesiology reports, pp. 1–7, 2020.
2. C. A. Hagberg and J. L. Benumof, Benumof and Hagberg's airway management, 4rd ed. Philadelphia: Elsevier, p. 767, 2018.
3. I. Dornberger, Schwieriges Atemwegsmanagement bei Erwachsenen und Kindern, Stuttgart: Thieme, p. 92, 2013.
4. C. A. Hagberg and J. L. Benumof, Benumof and Hagberg's airway management, 4rd ed. Philadelphia: Elsevier, p. 768, 2018.
5. C. A. Hagberg and J. L. Benumof, Benumof and Hagberg's airway management, 4rd ed. Philadelphia: Elsevier, p. 861, 2018.