



# Freie Sicht und stabiler Halt



## PerformaTrak AF541 Mund-Nasen-Maske

mit Abdichtung unter der Nase

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Komfortabel und benutzerfreundlich



## Freies Sichtfeld & optimaler Tragekomfort


Das einzigartige Design des Maskenkissens der AF541 mit der Abdichtung unterhalb der Nase ermöglicht dem Patienten ein freies Sichtfeld. Gleichzeitig bietet die Maske stabilen Halt und sehr guten Tragekomfort auch bei höheren Drücken.

## Keine Druckstellen

Das Maskenkissen liegt unterhalb der Nase auf und hat keinen Kontakt zum Nasenrücken. Damit werden Druckstellen am Nasenrücken vermieden. Auch für Brillenträger geeignet.

## Einfache & schnelle Maskenanpassung

Der richtige Abstand zum Gesicht ist mittels Taste am Maskenrahmen mit einem Handgriff sofort einstellbar. Die Stirnstütze ist mit einem Kugelgelenk ausgestattet und stellt sich automatisch in einen optimalen Winkel zur Stirn.

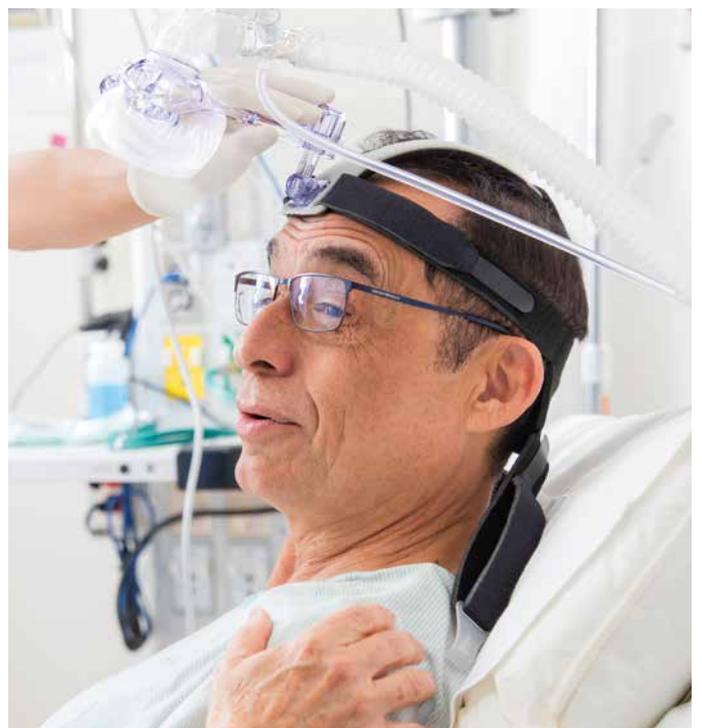

## Anwenderfreundliche Handhabung

Die einzigartige CapStrap-Maskenhalterung bietet einen besonders stabilen Halt und ist sehr schnell anzulegen. Zusätzlich ermöglicht die CapStrap-Halterung die Maske mit einem Handgriff hochzuklappen und zu fixieren. Damit hat das Pflegepersonal einen einfachen Zugang zum Mund z. B. für die Mundpflege oder um dem Patienten trinken oder sprechen zu ermöglichen.



## Erhöhter Tragekomfort mit SureSeal-Technologie

Das Maskenkissen der AF541 verfügt über eine zusätzliche Folie über dem Maskenkissen, die sich während des Betriebes mit Luft füllt. Dadurch passt sich die Maske perfekt an die Gesichtskonturen an, erhöht auf diese Weise den Anwendungskomfort und verhindert Luftleckagen.

## AF541 mit minimaler Kontaktfläche

Maske kann einfach hochgeklappt, gedreht und fixiert werden, um die Hände während der Mundpflege frei zu haben

Taste am Maskenrahmen zur einfachen Anpassung

CapStrap Maskenhalterung mit intuitiven Hakenclips kann sehr schnell abgenommen werden, um Zugang zum Mund des Patienten zu erhalten



Hergestellt aus BPA-freiem Material

Auswechselbare Kniestücke

## Bestellhinweis

### PerformaTrak AF541 mit CapStrap

| Artikel   | Größe      | Art.-Nr.  | VE/Stk. |
|---|------------|-----------|---------|
| PerformaTrak AF541<br>mit <b>Standard-Kniestück</b> | XS         | 581133684 | 10      |
|   | A = Small  | 581133685 | 10      |
|   | B = Medium | 581133686 | 10      |
|   | C = Large  | 581133687 | 10      |
| PerformaTrak AF541<br>mit <b>Kniestück Typ 1</b>    | XS         | 581133668 | 10      |
|   | A = Small  | 581133669 | 10      |
|   | B = Medium | 581133670 | 10      |
|   | C = Large  | 581133671 | 10      |
| PerformaTrak AF541<br>mit <b>Kniestück Typ 2</b>    | XS         | 581133676 | 10      |
|   | A = Small  | 581133677 | 10      |
|   | B = Medium | 581133678 | 10      |
|   | C = Large  | 581133679 | 10      |



### PerformaTrak AF541 mit Vierpunkt-Maskenhalterung

| Artikel   | Größe      | Art.-Nr.  | VE/Stk. |
|---|------------|-----------|---------|
| PerformaTrak AF541<br>mit <b>Standard-Kniestück</b> | XS         | 581133680 | 10      |
|   | A = Small  | 581133681 | 10      |
|   | B = Medium | 581133682 | 10      |
|   | C = Large  | 581133683 | 10      |
| PerformaTrak AF541<br>mit <b>Kniestück Typ 1</b>    | XS         | 581133664 | 10      |
|   | A = Small  | 581133665 | 10      |
|   | B = Medium | 581133666 | 10      |
|   | C = Large  | 581133667 | 10      |
| PerformaTrak AF541<br>mit <b>Kniestück Typ 2</b>    | XS         | 581133672 | 10      |
|   | A = Small  | 581133673 | 10      |
|   | B = Medium | 581133674 | 10      |
|   | C = Large  | 581133675 | 10      |



### Ersatzmaskenkissen

| Artikel                                | Größe      | Art.-Nr.  | VE/Stk. |
|--|------------|-----------|---------|
| PerformaTrak AF541 <b>Maskenkissen</b> | XS         | 581127634 | 10      |
|  | A = Small  | 581120980 | 10      |
|  | B = Medium | 581120981 | 10      |
|  | C = Large  | 581120982 | 10      |



### Kniestücke

| Artikel  | Art.-Nr.  | VE/Stk. |
|--|-----------|---------|
| <b>Standard-Kniestück für NIVO-Vernebler</b> ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatemöffnungen, für Zwei-Schlauch-Systeme ( <i>Intensiv-Respirator &amp; HighFlow-CPAP</i> ) | 581120969 | 5       |
| <b>Kniestück Typ 1 für NIVO-Vernebler</b> mit Sicherheitsventil, ohne Ausatemöffnungen, für Ein-Schlauch-Systeme ( <i>NIV-Respirator</i> )                               | 581120967 | 5       |
| <b>Kniestück Typ 2 für NIVO-Vernebler</b> mit Sicherheitsventil und Ausatemöffnungen, für die CO <sub>2</sub> -Elimination ( <i>NIV-Respirator</i> )                     | 581120968 | 5       |
| <b>Kniestück mit Bronchoskopieöffnung</b> ohne Sicherheitsventil, ohne Ausatemöffnungen, für Zwei-Schlauch-Systeme ( <i>Intensiv-Respirator &amp; HighFlow-CPAP</i> )    | 581120984 | 5       |

