



Ausgezeichnet  
mit dem Red Dot  
Design Award &  
iF Gold Award

# Innovatives Design für einen traumhaften Tragekomfort




## **DreamWear Full Face**

volle Bewegungsfreiheit  
ermöglicht jede Schlafposition

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Freier Blick – freie Bewegung

Durch ihr revolutionäres Design und den Sitz unter der Nase ist die DreamWear Full Face kaum spürbar – für maximale Freiheit und ein möglichst natürliches Schlafgefühl.

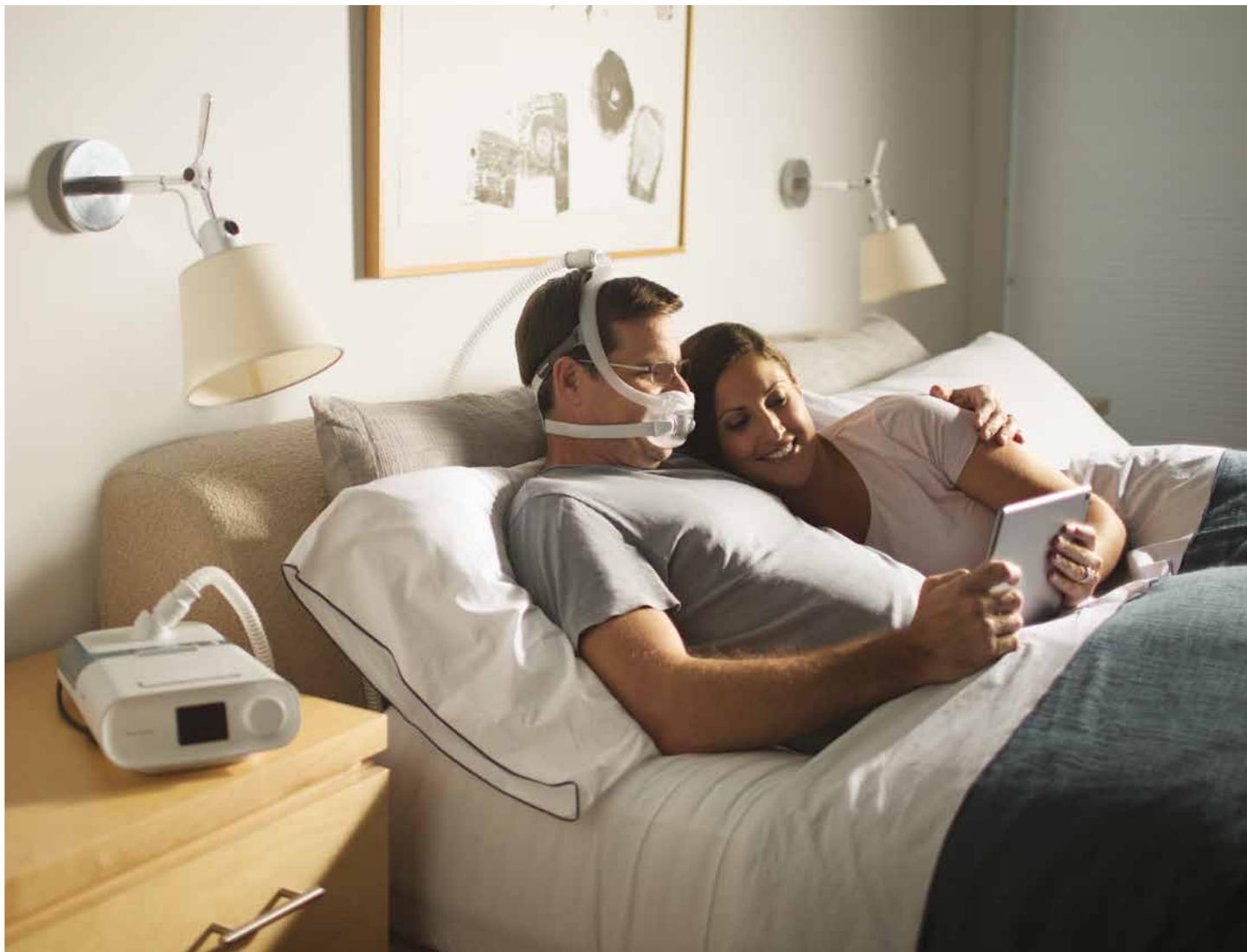

## Keine Abdrücke

Die DreamWear Full Face vereint die besten Eigenschaften von Full Face Masken und ist mit ihrem neuartigen Design eine Innovation in der Schlaftherapie. Das weiche, flexible Maskenkissen liegt unterhalb der Nase auf und hat keinen Kontakt zum Nasenrücken. Dadurch werden Druckstellen am Nasenrücken oder unangenehme Reizungen der Nasenlöcher komplett vermieden.

## Als wäre sie gar nicht da

Der Schlauchanschluss auf dem Kopf ermöglicht Ihnen jederzeit die angenehmste Schlafposition zu finden und verhilft Ihnen so zu mehr Bewegungsfreiheit in der Nacht. Mit der DreamWear Full Face können Sie sich zur Seite drehen oder sogar auf dem Bauch schlafen ohne Behinderung durch Schlauch oder Maske. Der besonders weiche Maskenrahmen aus Silikon, durch den die Luft geleitet wird, liegt nur minimal auf und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

## Freie Sicht

Die DreamWear Full Face lässt Ihnen freie Sicht. Das offene Design ermöglicht das Tragen einer Brille, Lesen, Fernsehen oder die Verwendung eines Computers oder Tablets vor dem Einschlafen.

## Anwender über die DreamWear Masken

„Auf der Seite schlafen, sich drehen, lesen mit Brille...geht alles prima! Minimale Druckstellen an der Wange, sehr gut zu verstellen und aufzusetzen. Der Schlauch ist nicht im Weg. Habe mich schnell an diese Maske gewöhnt und freue mich inzwischen auf jede kommende Nacht.“

– Haabermaas



„Besonders toll finde ich, dass ich eine Brille aufsetzen kann. Das ist mit den anderen Masken nicht möglich.“

– Reiner G.

„Das Schlafen mit der DreamWear verlief super! Die Schlauchführung auf dem Kopf ist genial. Eine extrem gute Maske. Ich konnte bestens schlafen, nirgendwo eine Druckstelle.“ – Michael E.



### Drehbarer Anschluss

ermöglicht volle Bewegungsfreiheit

### Weicher Silikonrahmen

aus hochwertigem, strapazierfähigem Material, schmiegt sich sanft an das Gesicht ohne Druckstellen zu hinterlassen

### Magnetische Clips

für eine einfache Befestigung

### Stoffpolster

abnehmbar für eine hygienische Reinigung von Rahmen und Polstern

### Maskenkissen unter der Nase

sanfter Sitz, der die Nase nicht einengt mit durchgehender Nasenöffnung für freies Atmen

## Ausgezeichnetes Maskendesign



Die Jury des Red Dot Design Awards hat 2018 die herausragende Qualität der DreamWear Full Face gewürdigt. Besonders herausgestellt wurde, dass die Bedürfnisse der Benutzer im Mittelpunkt stehen.



Die DreamWear FullFace Maske wurde mit dem iF Gold Award 2018 ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich für Leistungen im Bereich der Produktgestaltung verliehen.

## Anleitung zur Anpassung der Full Face Maske

Das DreamWear Masken-Set beinhaltet Maskenkissen in 4 verschiedenen Größen sowie eine Anpass-Schablone, um die ideale Maskenkissengröße zu bestimmen. Um die Größe des Maskenkissens zu bestimmen, wird die Anpass-Schablone waagrecht unter die Nase gehalten.



### 1. Schritt

Platzieren Sie die Maskenkissenöffnung direkt unter den Nasenlöchern und stellen Sie sicher, dass sich die Nase nicht innerhalb der Maskenkissenöffnung befindet.



### 2. Schritt

Nehmen Sie die zusammengesetzte Maske, positionieren Sie den Rahmen oben auf dem Kopf und ziehen Sie das Kopfband über den Hinterkopf.



### 3. Schritt

Befestigen Sie die magnetischen Kopfbandclips am Maskenkissen. Um die Maske anzupassen, ziehen Sie die Kopfbandlaschen vom Stoff ab. Passen Sie die Länge der Bänder an. Drücken Sie die Laschen wieder an den Stoff.



### 4. Schritt

Nach Abschluss der Maskeneinstellung sollte der abgewinkelte Schlauchanschluss auf der Kopfoberseite mittig aufliegen. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Anschlussstück der Maske oben auf dem Kopf.

## Bestellhinweis

Artikel Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
DreamWear Full Face Maske Fit-Pack mit 4 Maskenkissen Größe S, M, MW, L und Maskenrahmen in M	78 1133400	1

## HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen.

Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

