



Die optimale Lösung bei der schwierigen Intubation



Airtraq SP – optisches Einweg-Laryngoskop

mit Tubus-Führungskanal
einfach, schnell, zuverlässig

HABEL
MEDIZINTECHNIK


Airtraq SP

optisches Einweg-Laryngoskop

Eigenschaften

Airtraq SP ist ein anatomisch geformtes Laryngoskop mit einem Führungskanal für den Endotrachealtubus und einem Kanal für die hochauflösende Optik.

Das System ist in wenigen Sekunden einsatzbereit und kann mit jedem Standard-Endotrachealtubus verwendet werden. Das Airtraq-Laryngoskop ist mit einem Anti-Beschlagsystem und einer Kaltlichtquelle ausgestattet.

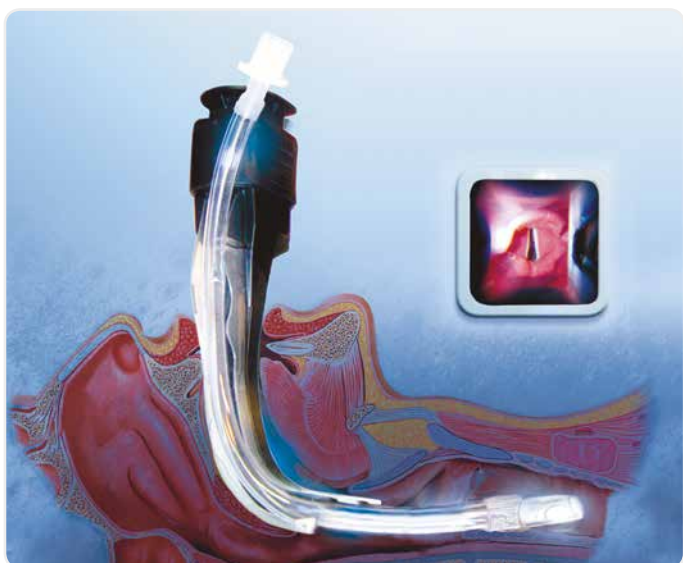

Uneingeschränkte, vergrößerte Sicht dank hochauflösender Optik, Anti-Beschlagsystem und Kaltlichtquelle










Vorteile

- **Uneingeschränkte, vergrößerte Sicht** auf die Atemwege, während der gesamten Intubation.
- **Intubation in jeder Lage möglich**, z. B. auch im Sitzen, der Hals muss dabei nicht überstreckt werden.
- **Besonders einfache Anwendung**, kurze Lernphase.
- **Ideal auch für Trainingszwecke** durch optionales Videosystem zum Aufzeichnen und für die Wiedergabe über Monitor oder Computer.

Anwendungsmöglichkeiten

- bei Notfällen im Rettungswesen
- bei Ruhigstellung der Halswirbelsäule
- bei nasaler Intubation
- bei Intubation mit einem Doppellumen-Tubus
- als Führung bei einer Gastroskopie
- zur Darstellung der Stimmbänder
- zur Entfernung von Fremdkörpern in den Atemwegen

Bestellhinweis

| Artikel | | Art.-Nr. | VE/Stk. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| ET-Tuben von 7,0 – 8,5 mm |  | 34A-011 | 6 |
| ET-Tuben von 6,0 – 7,5 mm |  | 34A-021 | 6 |
| ET-Tuben von 3,5 – 5,5 mm |  | 34A-031 | 6 |
| ET-Tuben von 2,5 – 3,5 mm |  | 34A-041 | 6 |
| nasale Intubation |  | 34A-061 | 6 |
| Doppellumen-Tubus von 35 – 41 CH |  | 34A-071 | 6 |
| Zubehör | | | |
| HABEL Airtraq Wifi-Camcorder inkl. Koffer, Ladestation und Ladekabel |  | 34A-390SET | 1 |