



Schnelle Atemhilfe mit weicher Gel-Manschette



i-gel **supraglottische Atemhilfe**

Einführung in Sekunden
naturgetreue & anatomische Passform



Die aktuelle Bibliografie für Reanimation und Notfalleinsatz
finden Sie unter www.habel-medizintechnik.at

HABEL
MEDIZINTECHNIK

i-gel supraglottische Atemhilfe

i-gel ist eine einzigartige supraglottische Atemhilfe und das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, wobei eine perfekte Übereinstimmung mit der Anatomie, inspiriert durch die Architektur der perilaryngealen Strukturen, gelungen ist.

i-gel = natürliches Atemwegs-Management

Form, Konsistenz und Konturen des Produktes bilden exakt die pharyngealen, laryngealen und perilaryngealen Verhältnisse ab, um eine perfekte Abdichtung zu erzielen. Dieses innovative Konzept erübrigt das Aufblasen einer Manschette und reduziert damit signifikant das Risiko von Kompressionstraumata.

Keine aufblasbare Manschette

Die Bezeichnung i-gel ist abgeleitet von dem gelartig weichen Material. Erst dieses innovative thermoplastische Elastomer von medizinischer Qualität ermöglichte die Entwicklung einer nicht aufblasbaren Manschette und damit die einzigartig schnelle, leichte und zuverlässige Einführung.

Leicht, sicher und schnell



Die Anwendung von i-gel ist unglaublich einfach. Ein geübter Anwender kann das Produkt in weniger als 5 Sekunden einführen. i-gel ermöglicht ohne Blockmanschette eine sichere und schnelle Airway-Management-Lösung.

Anwendungen

i-gel wurde entwickelt zur Aufrechterhaltung offener Atemwege für routine- und notfallmäßige Narkosen während operativer Eingriffe an nüchternen Patienten unter Spontanatmung oder intermittierender Überdruckbeatmung (IPPV). Die i-gel kann auch während der Reanimation bewusstloser Patienten eingesetzt werden.

Bestellhinweis i-gel für Pädiatrie

Typ	Art.-Nr.	Größe	kg	VE/Stk.
Neugeboren	378201	1,0	2–5 kg	10
Kleinkind	378215	1,5	5–12 kg	10
Kind S	378202	2,0	10–25 kg	10
Kind L	378225	2,5	25–35 kg	10

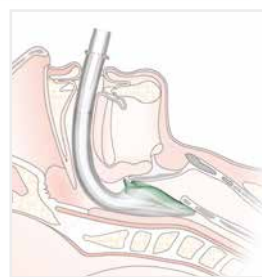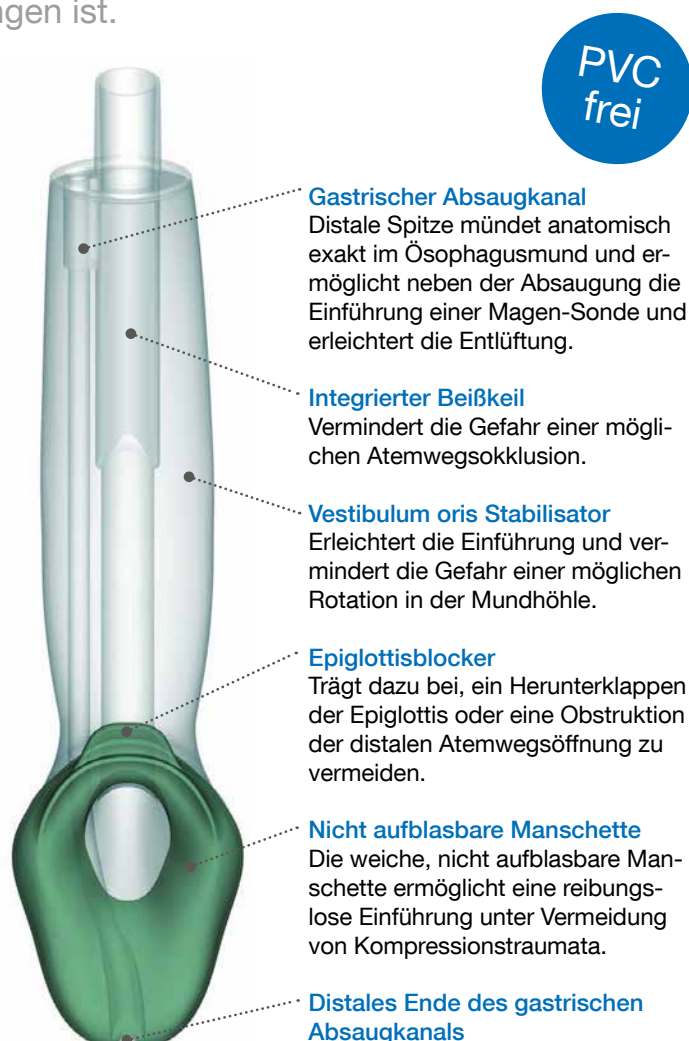

Natürliches Airway-Management

i-gel ist anatomisch & naturgetreu geformt, legt sich exakt über das Knorpelgerüst des Larynx, erreicht eine zuverlässige perilaryngeale Abdichtung und macht somit eine aufblasbare Manschette überflüssig.

Bestellhinweis i-gel für Erwachsene

Typ	Art.-Nr.	Größe	kg	VE/Stk.
S	378203	3,0	30–60 kg	25
M	378204	4,0	50–90 kg	25
L	378205	5,0	> 90 kg	25