



Schnelle und effiziente Sicherung des Atemwegs



VBM Larynx-Tuben

schneller Einsatz im Notfall
einfache Handhabung, effiziente Beatmung

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Für Spontanatmung & positive Druckbeatmung im Notfall

Der Larynx-Tubus ist ein supraglottischer Luftweg für die Anwendung in der Allgemein-anästhesie unter spontaner oder positiver Druckbeatmung. Im Notfall ist der Larynx-Tubus ein ideales Hilfsmittel zur Atemwegssicherung beim schwierigen Atemweg, als alternative Technik zur Maskenbeatmung und endotrachealen Intubation.

Gesicherte Ventilation

Die Sicherung des Atemwegs ist einer der zentralen Aspekte bei der Durchführung einer erfolgreichen Reanimation. In den aktuellen Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) wurde der Larynx-Tubus als ein weiteres Instrument zur Sicherung des Atemwegs für die kardiopulmonale Reanimation aufgenommen.

Die großvolumigen Cuffs passen sich der Anatomie des Patienten an und dichten Ösophagus und Pharynx ab. Die Form und das Design ermöglichen ein blindes Einführen (ohne Laryngoskopie) und Positionieren des Larynx-Tubus im Hypopharynx. Das ermöglicht auch unerfahrenem Personal den Gebrauch des Larynx-Tubus.



Intubation

Der iLTS-D sichert den Atemweg im Notfall und ermöglicht die fiberoptische Platzierung eines ET-Tubus (mit abnehmbarem Konnektor). Während des Intubationsvorgangs muss der supraglottische Atemweg nicht aufgegeben werden.



Patientensicherheit

Extrem dünnwandige Niederdruckcuffs garantieren maximalen Airway Leak Pressure bei geringem Cuffdruck ($< 60 \text{ cm H}_2\text{O}$) und minimieren somit die Belastung der Schleimhaut.



Beißblock

Der Beißblock klickt in den Larynx-Tubus, schützt diesen vor Okklusion und ermöglicht die Tubusfixation mittels eines elastischen Halsbands. Der Beißblock ist als Zubehör erhältlich.



Farbkodierung

Konnektor und Spritze sind farblich aufeinander abgestimmt und vereinfachen das Belüften der Cuffs mit dem empfohlenen maximalen Füllvolumen.




Drainagekanal
(nur bei LTS II + LTS-D)
passend für Magen- und
Absaugsonde (max. 18 CH)

Kontrollballon
dient als Druckindikator

Proximaler Cuff
stabilisiert den Tubus und blockt
Naso- und Oropharynx

Tubus-Öffnungen
liegen dem Kehlkopfeneingang
gegenüber und ermöglichen sowohl
Absaugung als auch Bronchoskopie

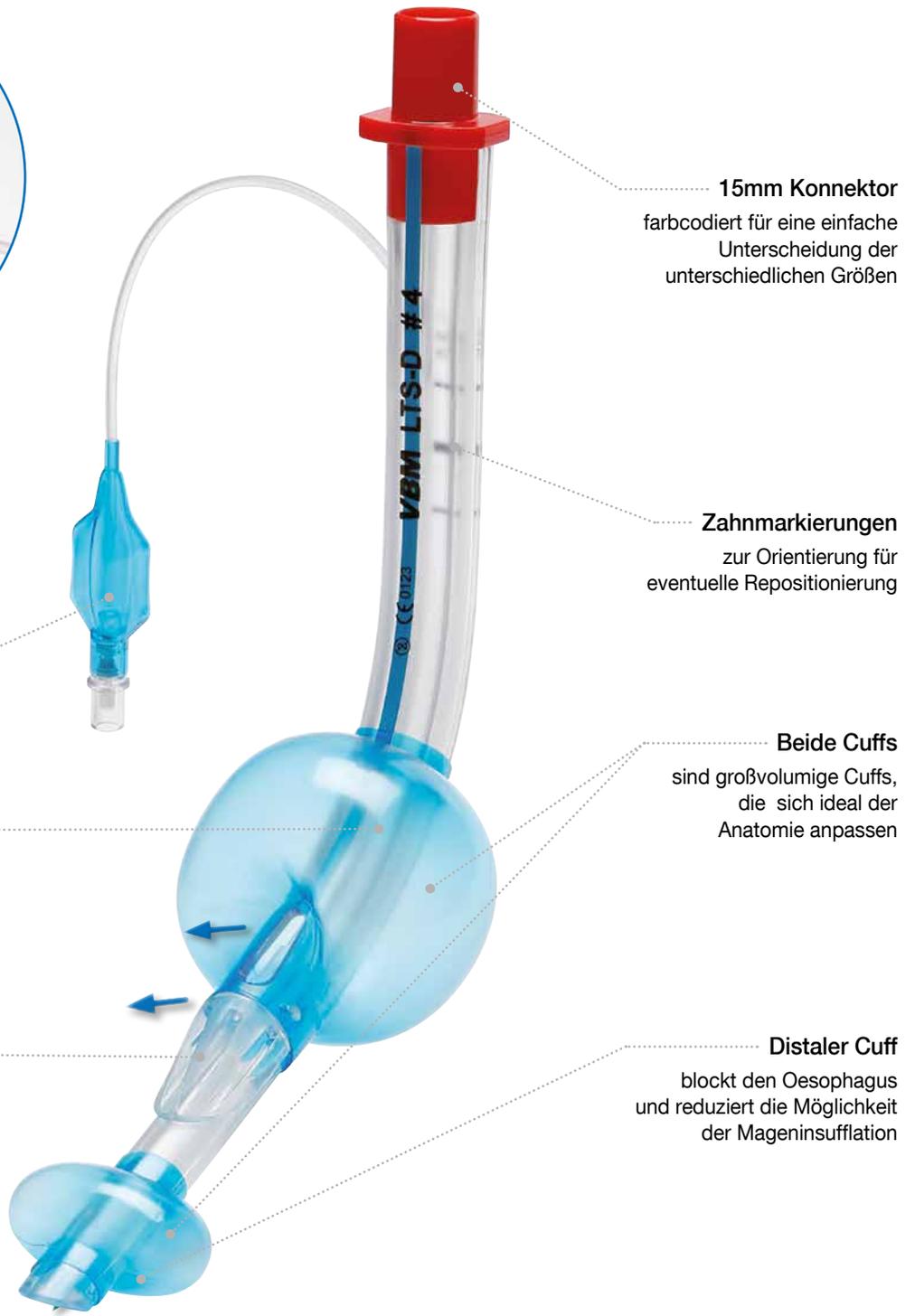

15mm Konnektor
farbcodiert für eine einfache
Unterscheidung der
unterschiedlichen Größen

Zahnmarkierungen
zur Orientierung für
eventuelle Repositionierung

Beide Cuffs
sind großvolumige Cuffs,
die sich ideal der
Anatomie anpassen

Distaler Cuff
blockt den Oesophagus
und reduziert die Möglichkeit
der Mageninsufflation



Larynx-Tubus LTS II

- autoklavierbar
- doppelummig
- Drainagekanal



Larynx-Tubus LTS-D

- Einmalgebrauch
- doppelummig
- Drainagekanal



Larynx-Tubus iLTS-D

- Einmalgebrauch
- doppelummig
- Drainagekanal
- fiberoptische Intubation

Bestellhinweis

Larynx-Tubus LTS-D | doppellumig mit Absaugkanal | Einmalgebrauch, steril

Art.-Nr.	Artikel	Konnektorfarbe	Größe	VE
4732-06-100-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 0 (inkl. Spritze)	<input type="checkbox"/> transparent	< 5 kg	1 Stk./Set
4732-06-101-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 1 (inkl. Spritze)	<input type="checkbox"/> weiß	5 – 12 kg	1 Stk./Set
4732-06-102-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 2 (inkl. Spritze)	<input checked="" type="checkbox"/> grün	12 – 25 kg	1 Stk./Set
4732-06-125-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 2.5 (inkl. Spritze)	<input checked="" type="checkbox"/> orange	125 – 150 cm	1 Stk./Set
4732-06-103-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 3 (inkl. Spritze)	<input checked="" type="checkbox"/> gelb	< 155 cm	1 Stk./Set
4732-06-104-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 4 (inkl. Spritze)	<input checked="" type="checkbox"/> rot	155 – 180 cm	1 Stk./Set
4732-06-105-1N	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus LTS-D # 5 (inkl. Spritze)	<input checked="" type="checkbox"/> violett	> 180 cm	1 Stk./Set
4732-06-209-1N	HABEL VBM Erwachsenen-Notfall-Set LTS-D (je 1 Stk. # 3/4/5, inkl. Spritze)			1 Set
4732-06-309-1N	HABEL VBM Kinder-Notfall-Set LTS-D (je 1 Stk. # 0/1/2/2.5, inkl. Spritze)			1 Set

Info: Bei Bestellung von 10 Stück-Sets in der Bestellnummer statt '1' - '0' angeben (bspw. 47 32-06-103-1N - 47 32-06-003-1N).

Intubations-Larynx-Tubus iLTS-D | Einmalgebrauch, steril

Art.-Nr.	Artikel	Größe	VE
4732-08-123-1	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus iLTS-D Einzel-Set, (inkl. Spritze), Größe 2.5/3	125 – 150 cm	1 Stk./Set
4732-08-145-1	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus iLTS-D Einzel-Set (inkl. Spritze), Größe 4/5	≥ 155 cm	1 Stk./Set
4732-08-023-1	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus iLTS-D 10er Set, Größe 2.5/3	125 – 150 cm	10er Set
4732-08-045-1	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus iLTS-D 10er Set, Größe 4/5	≥ 155 cm	10er Set
4732-08-309-1	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus iLTS-D Intubations-Set (inkl. ET-Tubus & Spritze) Größe 2.5/3	125 – 150 cm	1 Set
4732-08-209-1	HABEL VBM Einweg-Larynx-Tubus iLTS-D Intubations-Set (inkl. ET-Tubus & Spritze) Größe 4/5	≥ 155 cm	1 Set
4731-40-055-1	ET Tubus mit Stabilisator für iLTS-D Größe 2.5/3	5,5 mm I.D	10
4731-40-075-1	ET Tubus mit Stabilisator für iLTS-D Größe 4/5	7,5 mm I.D	10

Larynx-Tubus LTS II | doppellumig mit Absaugkanal | autoklavierbar

Art.-Nr.	Artikel	Konnektorfarbe	Größe	VE
4732-05-000	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 0 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input type="checkbox"/> transparent	< 5 kg	1 Stück
4732-05-001	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 1 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input type="checkbox"/> weiß	5 – 12 kg	1 Stück
4732-05-002	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 2 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input checked="" type="checkbox"/> grün	12 – 25 kg	1 Stück
4732-05-025	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 2.5 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input checked="" type="checkbox"/> orange	125 – 150 cm	1 Stück
4732-05-003	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 3 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input checked="" type="checkbox"/> gelb	< 155 cm	1 Stück
4732-05-004	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 4 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input checked="" type="checkbox"/> rot	155 – 180 cm	1 Stück
4732-05-005	HABEL VBM Larynx-Tubus LTS II # 5 (inkl. Spritze & Beißblock)	<input checked="" type="checkbox"/> violett	> 180 cm	1 Stück

Zubehör

Art.-Nr.
4754-07-000

Cuffdruckmeßgerät für Standard- und Larynxtuben



VE
1 Stück

Art.-Nr.
4754-04-111 20ml | # 0-1
4754-04-444 60ml | # 2-3
4754-04-555 100ml | # 4-5

Spritze mit Luer-Anschluss & Farbcodierung



VE
je 10 Stück

Art.-Nr.
Beißblock Größe 6 für # 3, 4 & 5
4740-70-060 autoklavierb.
4740-60-060-1 Einmalgebr.

Beißblock Größe 5 für # 2 & 2.5
4740-70-050 autoklavierb.
4740-60-050-1 Einmalgebr.



VE
je 25 Stück

Art.-Nr.
4740-06-075

Elastisches Halsband Länge: 75 cm



VE
10 Stück