



Einfache Intubation trotz schwierigem Atemweg



„S-Guide“ Intubationshilfe

anatomische Formung des ET-Tubus
für alle klassischen und Video-Laryngoskope

HABEL
MEDIZINTECHNIK

„S-Guide“ Intubationshilfe


3 % bis 5 % aller endotracheal zu intubierenden Patienten weisen einen sogenannten „schwierigen Atemweg“ auf.

Die herkömmliche Intubation mittels Laryngoskop ist in dieser Situation oft problematisch und manchmal sogar unmöglich. Die Verwendung formbarer **Bougies** oder **Stilette** ist ein **wesentlicher Bestandteil der Algorithmen zum schwierigen Atemweg**.

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Schoettker (Universitätsklinikum Lausanne, Schweiz) wurde eine formbare Intubationshilfe entwickelt – der „**S-Guide**“.

Die einzigartige Beschaffenheit des „S-Guide“ ermöglicht die Technik des orotrachealen „Tubustanz“ – durch die Kombination von gleichzeitiger Rotation des ET-Tubus und Zurückziehen des „S-Guide“ wird eine dreidimensionale „Tanzbewegung“ am distalen Tubusende erzielt.

Durch die **einstellbare „Hockeyschläger-Form“ des ETTubus (11CH und 15CH)** eignet sich die „S-Guide“ Intubationshilfe auch für den Einsatz bei speziellen anatomischen Gegebenheiten wie einer **hochstehenden Glottis oder oropharyngealen Tumoren**.

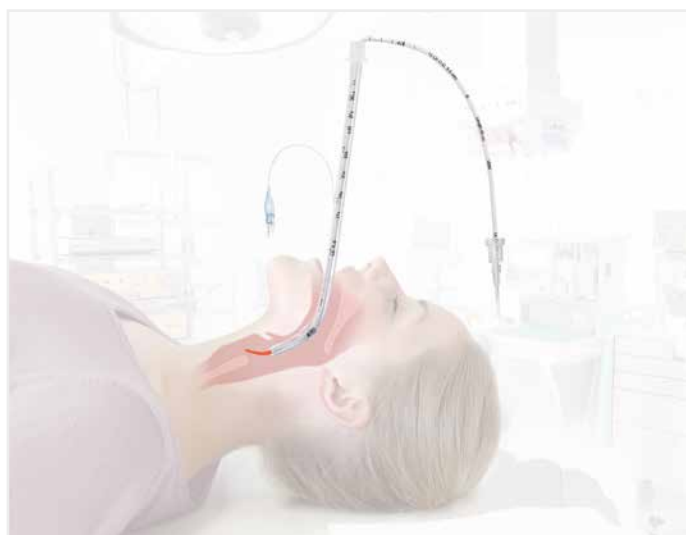

Die „S-Guide“ Intubationshilfe verbindet die bekannten Vorteile von Intubations-Stiletten und anderen Einführhilfen, und zeichnet sich durch die folgenden **drei Eigenschaften** besonders aus:

- Oxygenierungsmöglichkeit während Apnoephase (11CH und 15CH)
- Formbares, stabiles, farblich markiertes Segment
- Anpassung des ET-Tubus an Anatomie

Die „S-Guide“ Intubationshilfe bietet sich sowohl als exzellente Erweiterung **für die klassische Laryngoskopie** als auch für die immer öfter verwendeten **optischen oder Video-Laryngoskope** an, deren Vorteile nun optimal genutzt werden können.

Artikel	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	VE/Stk.
„S-Guide“ Intubationshilfe	● 40 cm für ET-Tuben ≥ 3.0 mm ID	8CH	4733-92-400-1	5
	● 65 cm für ET-Tuben ≥ 4.5 mm ID	11CH	4733-91-650-1	5
	● 65 cm für ET-Tuben ≥ 6.0 mm ID	15CH	4733-90-650-1	5