

Schnelle und sichere Koniotomie



ScalpelCric

chirurgisches Koniotomie Set sofort einsatzbereit




Sichere und wirksame Anwendung – sofort einsatzbereit

ScalpelCric ist ein vorgefertigtes Set entsprechend der Skalpell-Technik, das nach den neuesten Empfehlungen der DAS 2015 Richtlinien entwickelt wurde. Mit den unsterilen Training-Sets und speziellen Crico-Trainern können alle Mitarbeiter einfach geschult werden, um für den möglichen Notfalleinsatz bestmöglich vorbereitet zu sein.

ScalpelCric Set

- Skalpell
- Bougie mit gebogener und abgerundeter Spitze
- 6,0 mm Tubus mit Cuff und weicher Spitze
- Verbindungsschlauch mit Absaugmöglichkeit
- Spritze zur Cuffbelüftung
- Halsband zur Tubusfixierung

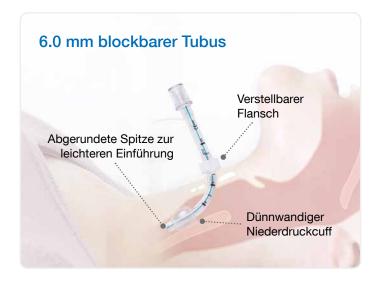

Bougie



- 40 cm Länge für einfachere Handhabung
- Längenmarkierungen unterstützen eine sichere Einführtiefe
- Reibungsarme Oberfläche erlaubt ein leichtes Einführen des Tubus
- Glatte, abgerundete und gebogene Spitze verhindert Trachealverletzungen
- Einzigartiges Material erlaubt das Formen des Bougie vor der Einführung

Beatmung und Fixation

- Verbindungsschlauch mit Absaugöffnung erhöht die Sicherheit gegen Aspiration
- Halsband mit Klettverschluss zur Tubusfixierung



Einfache Anwendung

Alle Komponenten des Sets sind in einer speziellen sterilen Instrumententasche in der Reihenfolge der Anwendung angeordnet – für eine sichere und wirksame Anwendung:

Stichinzision	Drehung	Bougie	Tubus

Bestellhinweis

Artikel	ArtNr.	VE/Stk.
ScalpelCric, steril	4730-08-447-1	1
ScalpelCric, unsteril (Trainings-Set)	4730-08-447	1
Crico-Trainer "Adelaide"	4730-14-700	1
Crico-Trainer "Frova"	4730-14-000	1
Crico-Trainer "Schweinetrachea"	4730-14-500	1

Hellmut Habel Gesellschaft m.b.H., Ignaz-Köck-Straße 20, 1210 Wien E-Mail: office@habel-medizintechnik.at, www.habel-medizintechnik.at Tel.: 01/292 66 42, Fax: 01/290 12 45

