



Schnelle und sichere Koniotomie



ScalpelCric

chirurgisches Koniotomie Set
sofort einsatzbereit


HABEL
MEDIZINTECHNIK

Sichere und wirksame Anwendung – sofort einsatzbereit

ScalpelCric ist ein vorgefertigtes Set entsprechend der Skalpell-Technik, das nach den neuesten Empfehlungen der DAS 2015 Richtlinien entwickelt wurde. Mit den unsterilen Training-Sets und speziellen Crico-Trainern können alle Mitarbeiter einfach geschult werden, um für den möglichen Notfalleinsatz bestmöglich vorbereitet zu sein.


ScalpelCric Set

- Skalpell
- Bougie mit gebogener und abgerundeter Spitze
- 6,0 mm Tubus mit Cuff und weicher Spitze
- Verbindungsschlauch mit Absaugmöglichkeit
- Spritze zur Cuffbelüftung
- Halsband zur Tubusfixierung

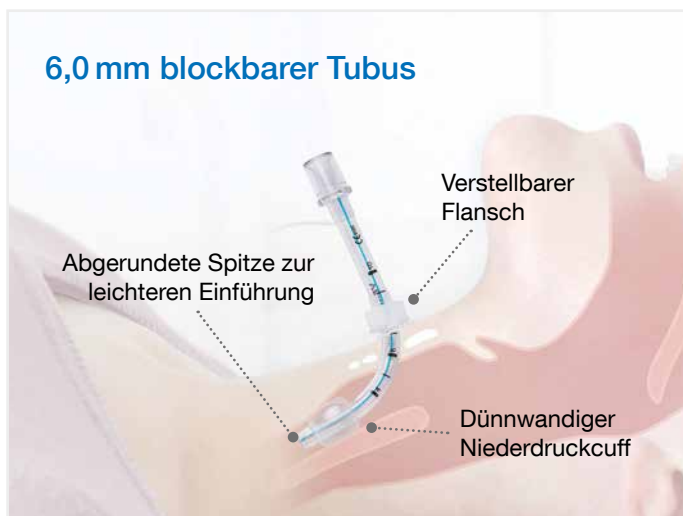

Einfache Anwendung

Alle Komponenten des Sets sind in einer speziellen sterilen Instrumententasche in der Reihenfolge der Anwendung angeordnet – für eine sichere und wirksame Anwendung:

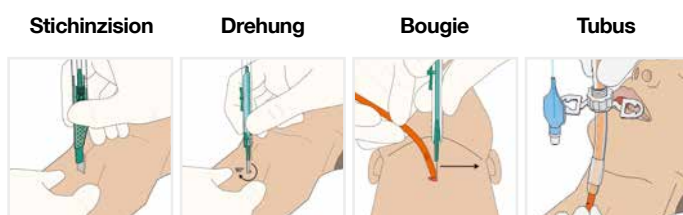

Bougie



- 40 cm Länge für einfachere Handhabung
- Längenmarkierungen unterstützen eine sichere Einföhrtiefe
- Reibungsarme Oberfläche erlaubt ein leichtes Einföhren des Tubus
- Glatte, abgerundete und gebogene Spitze verhindert Trachealverletzungen
- Einzigartiges Material erlaubt das Formen des Bougie vor der Einföhrung

Beatmung und Fixation

- Verbindungsschlauch mit Absaugöffnung erhöht die Sicherheit gegen Aspiration
- Halsband mit Klettverschluss zur Tubusfixierung



Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
ScalpelCric, steril	4730-08-447-1	1
ScalpelCric, unsteril (Trainings-Set)	4730-08-447	1
Crico-Trainer „Adelaide“	4730-14-700	1
Crico-Trainer „Frova“	4730-14-000	1
Crico-Trainer „Schweinetrachea“	4730-14-500	1