



Effiziente NIV bei maximalem Komfort



AcuCare Ein-Patienten Mund-Nasen-Masken

keine Aufbereitungskosten
schnelle Anpassung und zuverlässige Abdichtung

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Zuverlässiger Sitz

Die AcuCare Mund-Nasen-Masken bieten einen sicheren und stabilen Sitz und eine zuverlässige Abdichtung ohne Leckagen. Gleichzeitig maximieren Sie durch ihr weiches Maskenkissen den Tragekomfort und minimieren das Risiko von Druckstellen und Hautschädigungen. Das fördert die Therapieadhärenz und lässt Ihnen mehr Zeit, sich auf die medizinische Versorgung Ihrer Patienten zu konzentrieren.




Sicher und schnell in die Therapie

Für den optimalen Therapieerfolg ist es wichtig, eine schnelle Maskenakzeptanz des Patienten zu erreichen. Die Verwendung der geeigneten Maske ist dabei ausschlaggebend.

Durch die sowohl in AirFit-Masken zur Heimbeatmung als auch in AcuCare-Hospitalmasken verwendete gemeinsame Technologie wird gewährleistet, dass die Beatmungsmasken allen Patienten mit NIV-Bedarf eine komfortable und problemlose Therapie ermöglichen.

Durch die Kombination aus konturengerechtem Kopfband und bewährter Maskenkissentechologie wird die AcuCare stabil auf dem Gesicht gehalten. Dank dem praktischen Dreipunktkopfband und der Clips kann die Maske schnell und einfach angelegt, angepasst und abgenommen werden und sitzt gleich beim ersten Anlegen optimal.

Die AcuCare ist für unterschiedliche Therapieformen geeignet und lässt sich durch drei verschiedene Maskengrößen (S, M und L) an unterschiedlichste Gesichtsformen und -konturen anpassen.

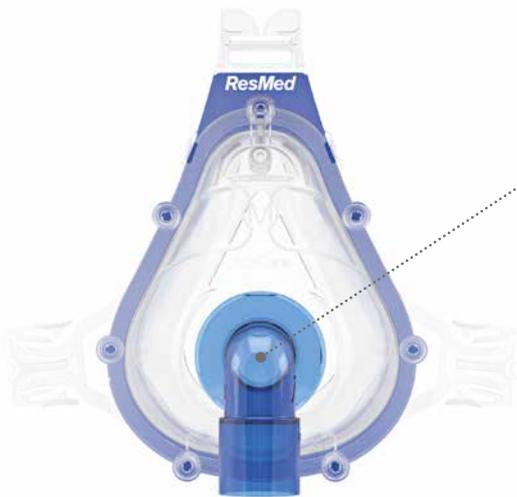


AcuCare F1-0

- Blaues Kniestück
- Maske ohne Luftauslass und ohne Asphyxieventil, für Intensivrespiratoren und HighFlow-CPAPs
- für Beatmungsgeräte, die ein Doppelschlauchsystem oder ein Einschlauchsystem mit integriertem Ausatemventil erfordern
- für bis zu 7-tägige Verwendung durch einen Patienten
- Schablone zur Größenbestimmung auf der Verpackung ermöglicht schnelle Auswahl der Maske



AcuCare F1-1

- Transparentes Kniestück mit blauem Punkt
- Maske ohne Luftauslass mit integriertem Antiasphyxieventil für Einschlauchsystem mit Ausatemöffnung
- für bis zu 7-tägige Verwendung durch einen Patienten
- Schablone zur Größenbestimmung auf der Verpackung ermöglicht schnelle Auswahl der Maske

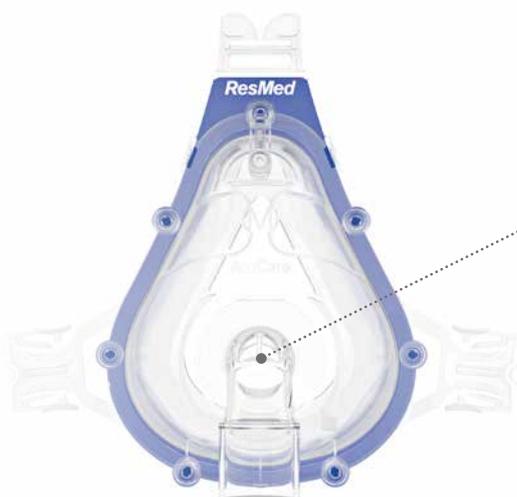

AcuCare F1-4

- Transparentes Kniestück
- Maske mit Luftauslass mit integriertem Antiasphyxieventil für Einschlauchsysteme ohne Ausatemöffnung
- für bis zu 7-tägige Verwendung durch einen Patienten
- Schablone zur Größenbestimmung auf der Verpackung ermöglicht schnelle Auswahl der Maske

Ein-Patienten Maske

bis zu 7-tägige Verwendung durch einen Patienten

Dreipunktkopfband

passt sofort, für eine besonders einfache Handhabung

3 Größen erhältlich

S, M, L

Clips

zum einfachen Einklicken

Doppelwandiges Maskenkissen

für eine angenehme, zuverlässige und wirksame Abdichtung

Farbcodierte und drehbare Kniestücke

- leicht zu unterscheiden, mit allen gängigen Schlauchsystemen kompatibel
- 360 Grad drehbar für eine einfache Schlauchpositionierung

Bestellhinweis

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
AcuCare F1-0 für Intensivrespiratoren und High-Flow-CPAPs	S	3660786	5
		3660759	20
	M	3660787	5
		3660760	20
	L	3660788	5
		3660761	20
AcuCare F1-1 für Einschlauchsysteme mit Ausatemöffnung	S	3660789	5
		3660762	20
	M	3660790	5
		3660763	20
	L	3660791	5
		3660764	20
AcuCare F1-4 für Einschlauchsysteme ohne Ausatemöffnung	S	3660792	5
		3660765	20
	M	3660793	5
		3660766	20
	L	3660794	5
		3660767	20