



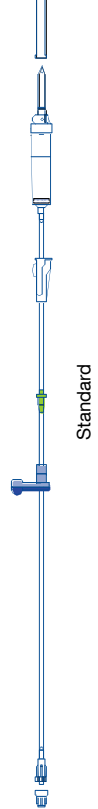
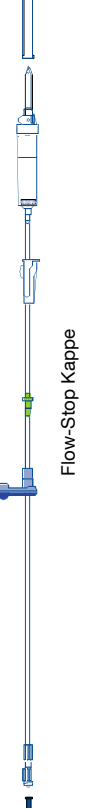
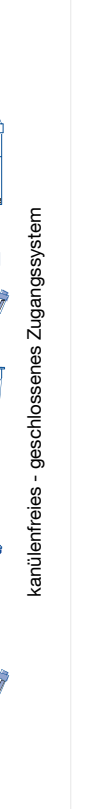
Infusionssets mit integriertem Free-Flow Schutz

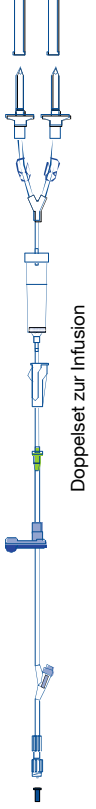
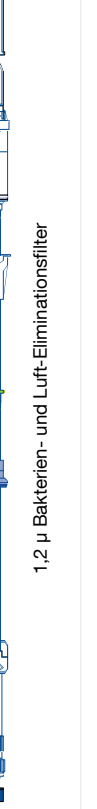
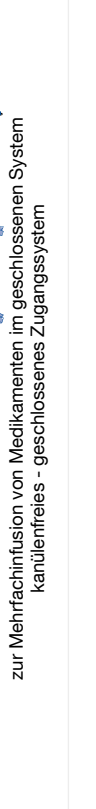


Agilia Volumat Infusionssets

Produktübersicht

Agilia Volumat Infusionssets

Bezeichnung	VL ST00	VL ST10	VL ST01	VL ST02	VL ST22	VL TR00
 Anti-Free-Flow-Sicherheitsclip Der integrierte Sicherheitsclip klemmt beim Entfernen des Sets die Infusionsleitung automatisch ab und verhindert auf diese Weise jeglichen Free-Flow.	 Standard	 Flow-Stop Kappe	 Standard, Y-Injektionsport	 kanülenfreies - geschlossenes Zugangssystem	 kanülenfreies - geschlossenes Zugangssystem	
Eigenschaften	Infusion	Infusion	Infusion	Infusion	Infusion	Transfusion
Belüfteter Einstechdorn u. Schutzkappe	■	■	■	■	■	
Unbelüfteter Einstechdorn u. Schutzkappe						■
Tropfkammer, leitungsaufwärts	■	■	■	■	■	■
Inline-Tropfkammer						
Tropfkammer-Filter	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	200 µm
Inline-Filter						
Rollenklemme	■	■	■	■	■	■
Robson-Klemme, leitungsaufwärts					■	
Schlauchlänge vor Pumpensegment	~ 90 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC
Schlauchlänge nach Pumpensegment	~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 165 cm DEHP-freies PVC
Kalibriertes Pumpensegment aus Silikon	■	■	■	■	■	■
Sicherheitsklemme, blau, Free Flow-Schutz	■	■	■	■	■	■
Kanülenfreier Zugang K-NECT oberhalb Tropfk.						
Kanülenfreier Zugang K-NECT patientennah				■	■ ■	
150-ml-Bürette						
Luer-Lock-Ansatz	■	■ (drehbar)	■ (drehbar)	■ (drehbar)	■ (drehbar)	■ (drehbar)
Schutzkappe	Std.	Flow Stop	Std.	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop
Gesamtlänge inkl. Pumpensegment	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm
Füllvolumen ca.	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml
VE	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.
Artikel-Nr.	71M46441000S	71M46441300S	71M46441600	71M46441900	71M46442500	71M46442800S

VL SP22	VL SP62	VL PN20	VL PN00	VL ON42	VL ON70	VL ON90	VL PA02	VL PA92
 Doppelseit zur Infusion	 kanülenfreies - geschlossenes Zugangssystem	 leitungsaufwärts geeigneter Luer-Lock-Ansatz anstelle eines Einstechdorns	 1,2 µ Bakterien- und Luft-Eliminationsfilter	 zur Mehrfachinfusion von Medikamenten im geschlossenen System kanülenfreies - geschlossenes Zugangssystem	 0,2 µ Bakterien- und Luft-Eliminationsfilter	 Onkologie, lichtgeschützt, Medikamente	 kanülenfreies - geschlossenes Zugangssystem	 kanülenfreies - geschlossenes Zugangssystem graduierte 150 ml Bürette
Transfusion	Infusion	Parenteral Ernährung	Parenteral Ernährung	Infusion Onkologie	Infusion Onkologie	Infusion Onkologie	Infusion (Pädiatrie)	Infusion (Pädiatrie)
■ ■	■	Luer-Lock-Anschluss	■	■	■	■	■	■
	■		■		■	■	■ 60 Tr.	
■		■		■				■
200 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm
			■ 1,2 µm		■ 0,2 µm			
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■ ■		■		■				■
~ (2x15) + 75 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm PUR ~ 165 cm PP/PUR	~ 90 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 115 cm PUR ~ 165 cm PP	~ 90 cm PUR ~ 165 cm	~ 90 cm lichtgesch. PUR ~ 165 cm lichtgesch. PUR/PP	~ 90 cm DEHP-freies PVC ~ 170 cm ø 2,5 mm	~ 90 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
				■ ■ ■ ■				■
■	■						■	
								■
■ (drehbar)	■	■ (drehbar)	■ (drehbar)	■	■	■	■ (drehbar)	■ (drehbar)
Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop
~ 290 cm	~ 285 cm	~ 280 cm	~ 285 cm	~ 315 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 290 cm	~ 300 cm
~ 30 ml	~ 25 ml	~ 26 ml	~ 25 ml	~ 30 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 22 ml	~ 25 ml
30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.	10 Stk.
71M46443100	71M46443400	71M46443700	71M46444300	71M46444000S	71M46444600S	71M46444900S	71M46442200S	71M46445200

VLST00 Standard Infusionsset

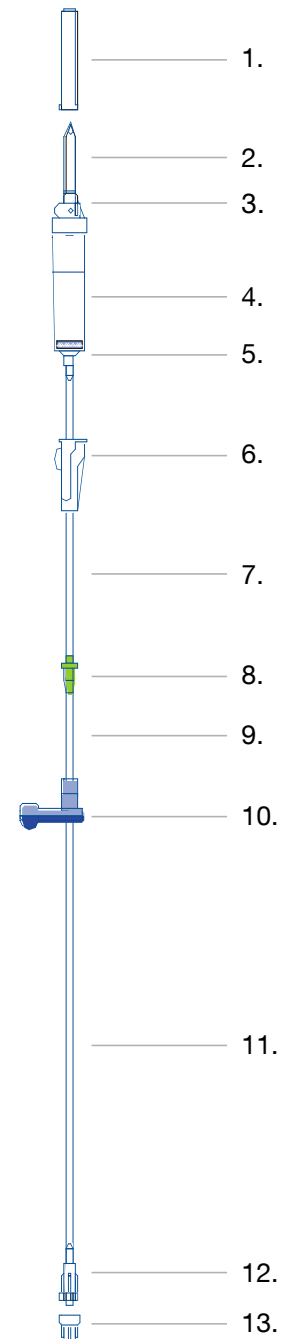
Abbildung

Infusionsset für Lösungen ohne spezielle Filtrationsbedingungen und ohne spezielle Unverträglichkeiten | Schlauchlänge ca. 270 cm | DEHP-frei | latexfrei

1. Schutzkappe
2. belüfteter Einstechdorn
3. bakterien-dichte Belüftung, verschließbar mit Klappe
4. Transparente Tropfkammer, Länge ~ 65 mm
5. 15 µm Filter
6. PVC-Schlauch (DEHP-frei): Durchmesser 3 x 4,1 mm, Schlauchlänge ~ 90 cm
7. Rollenklemme
8. Konnektor, grün
9. kalibriertes Pumpensegment aus Silikon
10. blaues SafeClip: Sicherungsklemme zum Schutz gegen Free-Flow
11. PVC-Schlauch (DEHP-frei): Durchmesser 3 x 4,1 mm, Schlauchlänge ~ 165 cm
12. Luer-Lock-Ansatz
13. Schutzkappe

Vorteile & Eigenschaften

- Schutz vor Free-Flow beim Entfernen des Sets aus der Pumpe
- sichere Setpositionierung in der Pumpe
- Seterkennung durch die Pumpe
- Vorbereitung und Befüllung ähnlich einem Schwerkraftset
- Verwendungsmöglichkeit mit Beuteln sowie Flaschen
- visuelle Kontrolle der Infusion
- Schwerkraftverwendung möglich
- kein Risiko einer Latexallergie
- kein Auslaugen von DEHP



Intensivstation



Operationssaal
Anästhesie



Allgemeinstation



Ambulanz



Transport



Notfall
Rettungsdienst